

# Sekundärluft-Kühlgerät

Hepa Jet Smart W-Version



Deutschsprachige Original-Betriebsanleitung

Siemens

7/2022

# Inhaltsverzeichnis

<b>Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller</b> .....	<b>4</b>
Anleitung verfügbar halten.....	4
Gestaltungsmerkmale im Text.....	4
Gestaltungsmerkmale in Abbildungen.....	5
Richtungsangaben.....	5
Mitgeltende Unterlagen.....	6
Dokumentationsbeauftragter.....	6
Herstelleradresse.....	6
<b>Sicherheit</b> .....	<b>7</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	7
Einsatzbereich.....	7
Pflichten des Betreibers.....	8
Grundlegende Sicherheitshinweise.....	9
Sachschäden vermeiden.....	10
Personalqualifikation.....	10
Persönliche Schutzausrüstung.....	11
Warn- und Hinweisschilder.....	11
Verbot eigenmächtiger Umbauten.....	12
Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen.....	13
Gestaltungsmerkmale von Hinweisen auf Sachschäden.....	13
<b>Beschreibung</b> .....	<b>14</b>
Aufgabe und Funktion.....	14
Geräteübersicht.....	15
Regelventil mit Ventilantrieb.....	15
Kabel-Fernbedienung im Gerät.....	16
Übersicht Infrarot-Fernbedienung.....	17
Übersicht Kabel-Fernbedienung.....	18
Angaben im Typenschild.....	20
<b>Gerät transportieren und lagern</b> .....	<b>21</b>
<b>Gerät montieren</b> .....	<b>22</b>
Bedingungen am Montageort.....	22
Mindestabstände zu den Wänden.....	23
Montage vorbereiten.....	24
Montage an einer Decke durchführen.....	25
Durchgangsventil und Ventilantrieb montieren.....	28
Dreiwegeventil und Ventilantrieb montieren.....	29
<b>Gerät anschließen</b> .....	<b>31</b>
Anschluss an das Kaltwassernetz herstellen.....	31
Abflussleitung für Tauwasser anschließen.....	32

Elektrischen Anschluss herstellen .....	33
<b>Gerät für die Inbetriebnahme vorbereiten .....</b>	<b>35</b>
Filter F7 in Filtergehäuse F7 einsetzen .....	35
Filter F9 in Filtergehäuse F9 einsetzen .....	37
Seitengehäuse montieren.....	39
Lamellen einstellen .....	40
<b>Gerät in Betrieb nehmen .....</b>	<b>41</b>
Ventilatorleistung für H13 Filter anpassen.....	41
Einstell-Parameter der Siemens-Steuerung ändern.....	42
<b>Gerät reinigen .....</b>	<b>44</b>
<b>Gerät warten .....</b>	<b>46</b>
Wartungsplan.....	46
Wartungsarbeiten vorbereiten .....	47
Gerät für Wartungsarbeiten vorbereiten .....	47
Seitengehäuse demontieren und montieren.....	48
Filtergehäuse demontieren und montieren.....	49
Lamellenrahmen demontieren und montieren.....	51
Filter der ersten Stufe (F7) wechseln .....	52
Filter der zweiten Stufe (F9) wechseln .....	54
<b>Hygieneprüfung durchführen .....</b>	<b>56</b>
Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung .....	56
Luftkeimzahl bestimmen .....	56
<b>Gerät außer Betrieb nehmen .....</b>	<b>57</b>
<b>Gerät entsorgen .....</b>	<b>58</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>59</b>
Hepa Jet Smart W-Version .....	59
Filterdaten .....	60
<b>Störungen beheben .....</b>	<b>61</b>
<b>Anhang.....</b>	<b>64</b>
Schaltpläne (Betrieb mit Siemens Steuerung).....	64
Schaltpläne (GLT-Betrieb) .....	67
Eingestellte Parameter (Siemens-Steuerung) .....	70
Technische Zeichnung.....	72
Kurzdatenblätter .....	73
Leistungsdiagramm Kondensatpumpe .....	77
EG-Konformitätserklärung .....	78
Prüfzertifikat Hygienische Eignung .....	79

## Hinweise zur Anleitung und zum Hersteller

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der sicheren Montage und Wartung, sowie dem sicheren Betrieb des Sekundärluft-Kühlgerätes Hepa Jet Smart. Das Sekundärluft-Kühlgerät wird im Folgenden kurz „Gerät“ genannt.

Diese Anleitung wendet sich an jede Person, die folgende Tätigkeiten mit und an dem Gerät vornimmt.

- transportieren
- montieren
- anschließen
- in Betrieb nehmen
- betreiben
- reinigen
- warten
- Störungen beseitigen
- entsorgen.

Insbesondere wendet sich diese Anleitung an Kundendienst-Monteure, ausgebildetes Fachpersonal und qualifiziertes und autorisiertes Betriebspersonal.

### Anleitung verfügbar halten

Diese Anleitung ist Bestandteil des Geräts.

- ▶ Bewahren Sie diese Anleitung immer mit dem Gerät auf.
- ▶ Liefern Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Gerät verkaufen oder in anderer Weise weitergeben.

### Gestaltungsmerkmale im Text


Verschiedene Elemente dieser Anleitung sind mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen. So können Sie die folgenden Elemente leicht unterscheiden:

Normaler Text

- Aufzählungen
  - Aufzählungen zweiter Ordnung
- ▶ Handlungsschritte
- ① Tipps. Enthalten zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel besondere Angaben zum wirtschaftlichen Gebrauch des Geräts.

## Gestaltungsmerkmale in Abbildungen

Im Text angesprochene Bauteile in Abbildungen sind durch Positionsnummern gekennzeichnet. Die Positionsnummern werden in jeder Abbildung ab „1“ durchnummeriert und im Uhrzeigersinn aufsteigend angeordnet.

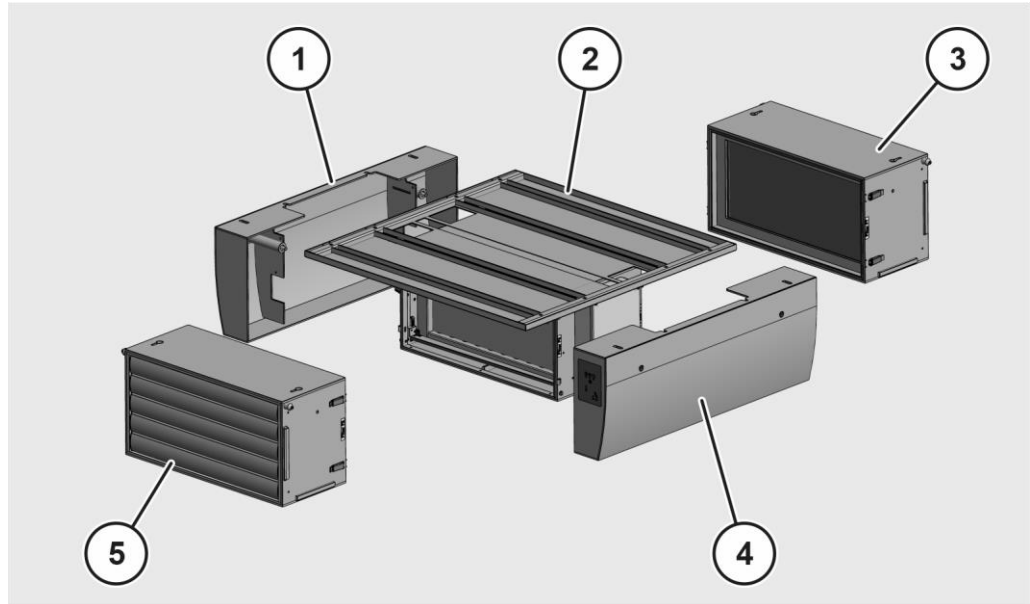

## Richtungsangaben

Die Richtungsangaben für das Gerät sind wie folgt definiert:

- „vorne“: Auf der Vorderseite (5) befinden sich der Luftauslass F9 mit den Luftleitlamellen und die Meldeleuchten.
- „hinten“: Auf der Rückseite (3) befinden sich der Lufteinlass F7 mit Luftleitlamellen und das Typenschild.
- „rechts“ bzw. „links“: Die rechte (4) und linke (1) Seite sind von der Vorderseite mit Blickrichtung nach hinten definiert.
- „oben“: Auf der oberen Seite befindet sich die Montageplatte (2) mit den Befestigungspunkten für die Deckenmontage.

Die übrigen verwendeten Richtungsangaben leiten sich aus diesen Richtungsangaben ab.

## Mitgeltende Unterlagen

Verletzungsgefahr durch Missachtung der mitgeltenden Unterlagen.

- ▶ Lesen und befolgen Sie alle mitgeltenden Unterlagen, bevor Sie mit dem oder am Gerät arbeiten. Sie finden diese im Dokumentationsordner des Geräts.

Mitgeltende Unterlagen sind insbesondere folgende Dokumentarten:

- Sicherheitsdatenblätter
- Bedienungsanleitung der Kabel-Fernbedienung und/oder der Infrarot-Fernbedienung
- Betriebsanleitung des Außengeräts
- Betriebsbuch
- Elektroschaltplan
- Klemmenplan
- Anschlussplan
- Montageanleitung für Durchgangs- und Dreiwegeventile
- Montageanleitung für elektrothermischen Stellantrieb
- Montageanleitung für Raumthermostat

## Dokumentationsbeauftragter

### OP-AIR GmbH

Herr Märzdorf

Lothringer Allee 2 (Im Energie-Effizienzzentrum)

44805 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 33 89 98 20

Fax: +49 (0) 234 33 89 98 29

E-Mail: [info@op-air.de](mailto:info@op-air.de)

## Herstelleradresse

### OP-AIR GmbH

Lothringer Allee 2 (Im Energie-Effizienzzentrum)

44805 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 33 89 98 20

Fax: +49 (0) 234 33 89 98 29

E-Mail: [info@op-air.de](mailto:info@op-air.de)

## Sicherheit

Schwere oder tödliche Verletzungen durch Unfälle aufgrund Missachtung der Hinweise in dieser Anleitung.

Insbesondere das Missachten der Hinweise im Kapitel Sicherheit kann zu Unfällen führen.

- ▶ Beachten und befolgen Sie alle Hinweise in dieser Anleitung, bevor Sie Arbeiten mit oder am Gerät durchführen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass diese Anleitung jedem Benutzer zur Verfügung steht.

Befolgen Sie außer den Hinweisen in dieser Anleitung in jedem Fall auch die am Montageort geltenden gesetzlichen und anderen Regelungen:

- Regelungen zur Unfallverhütung
- Regelungen für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten
- am Aufstellort geltende Bestimmungen, insbesondere zum Explosionsschutz, Brandschutz und Wasserschutz.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Sekundärluft-Kühlgerät dient der Klimatisierung von Innenräumen kleiner bis mittlerer Größe, insbesondere für OP-Räume der Raumklasse 2. Das Gerät darf nur innerhalb der Einsatzgrenzen und unter Einhaltung der technischen, hygienischen und genehmigungstechnischen Anforderungen betrieben werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Anleitung sowie das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise. Darüber hinaus müssen auch die Sicherheitshinweise sowie alle anderen Angaben aus den mitgeltenden Unterlagen beachtet und befolgt werden. Jeder andere Gebrauch gilt ausdrücklich als nicht bestimmungsgemäß.

## Einsatzbereich

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Einsatzbereiche, die in den technischen Daten und auf dem Typenschild genannt sind.
- ▶ Halten Sie folgende Umgebungsbedingungen ein:
  - min. 16 °C (80 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
  - max. 45 °C (65 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)

## **Pflichten des Betreibers**

- Der Betreiber des Geräts ist durch Gesetze oder Bestimmungen zum Erstellen von Anweisungen verpflichtet, die einen gefahrlosen Betrieb sichern.
- Der Betreiber des Geräts muss sicherstellen, dass nur qualifiziertes und autorisiertes Personal folgende Tätigkeiten vornimmt:
  - transportieren
  - montieren
  - aufstellen
  - anschließen
  - in Betrieb nehmen
  - betreiben
  - warten
  - außer Betrieb nehmen
  - entsorgen.
- Der Betreiber des Geräts muss dem Montage- und Wartungspersonal folgende Dokumente zugänglich machen:
  - diese Betriebsanleitung
  - die mitgeltenden Unterlagen
  - die jeweils geltenden, auf den Arbeitsplatz bezogenen Unfallverhütungsvorschriften
  - andere national geltende Vorschriften.
- Vor der Inbetriebnahme des Geräts muss der Betreiber oder eine durch den Betreiber autorisierte Person folgende Punkte sicherstellen:
  - dass die bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts gegeben ist
  - dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.



## Grundlegende Sicherheitshinweise

### Explosionsgefahren vermeiden

Schwere oder tödliche Verletzungen durch Explosion möglich.

- ▶ Setzen Sie das Gerät nicht in potenziell explosiver Atmosphäre ein.

### Verletzungen durch elektrischen Schlag vermeiden

Schwere oder tödliche Verletzungen durch Kontakt mit spannungsführenden Teilen.

- ▶ Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur durch Elektro-Fachpersonal durchführen.
- ▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn von Arbeiten spannungsfrei.
- ▶ Prüfen Sie vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Komponenten diese auf elektrische Spannung und mögliche Restladungen.
- ▶ Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur unter Aufsicht einer zweiten Person durch.

### Verletzungen durch Brand vermeiden

Verbrennungen infolge eines Brandes, Kontakt mit Mineralöl-Nebel, korrosiven Gasen oder Wasserdampf möglich.

- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstände zu Wänden und anderen Gegenständen eingehalten wurden.
- ▶ Prüfen Sie das Gerät nach Installation und Wartungsarbeiten auf Lecks des Kältemittel-Kreislaufs.
- ▶ Halten Sie Feuerquellen vom Gerät fern.

### Verletzungsgefahren durch mechanische Gefährdungen vermeiden

Knochenbrüche, Quetschungen, Prellungen durch Herabfallen des Geräts bei der Montage.

- ▶ Entfernen Sie vor der Montage des Geräts die Abdeckungen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren.
- ▶ Verwenden Sie für die Montage einen Montagelift oder ein ähnliches geeignetes Hilfsmittel zum Anheben des Geräts.

Verletzungsgefahr durch Stürzen von einer Leiter bei Montage des Geräts.

- ▶ Entfernen Sie vor der Montage des Geräts die Abdeckungen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren.
- ▶ Verwenden Sie für die Montage einen Montagelift oder ein ähnliches geeignetes Hilfsmittel zum Anheben des Geräts.
- ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.

Verletzungsgefahr der Hände am rotierenden Lüfter des Geräts.

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur bei geschlossenem Gehäuse.
- ▶ Lassen Sie Wartungsarbeiten nur durch unterwiesenes Fachpersonal ausführen.
- ▶ Schalten Sie vor allen Arbeiten am Gerät dieses strom- und drucklos.

### **Verletzungen durch Kontakt mit Kältemittel vermeiden**

Ausströmendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen, Erfrierungen, Erstickung und Hautreizungen führen.

- ▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten.
- ▶ Tragen Sie chemikalienbeständige Schutzhandschuhe bei Arbeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Kältemittel kommen könnten.
- ▶ Tragen Sie eine chemikalienbeständige Schutzbrille.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Hinweise aus dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt.

### **Umweltschäden vermeiden**

Bei unsachgemäßer Entsorgung von gefährlichen Medien kann es zu Umweltschäden kommen. Vergiftung kann die Folge sein.

- ▶ Lassen Sie gefährliche Medien wie z. B. Kältemittel ausschließlich durch Fachpersonal und nach gesetzlich geltenden Bestimmungen entsorgen.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Informationen aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
- ▶ Tragen Sie die persönliche Schutzausrüstung.

### **Sachschäden vermeiden**

Schäden oder Funktionsstörungen des Geräts bei unsachgemäßer Montage, unsachgemäßem Anschluss oder unsachgemäßer Wartung möglich.

- ▶ Lassen Sie die Montage, den Anschluss und Wartungsarbeiten nur durch qualifizierte Fachkräfte durchführen.

### **Personalqualifikation**

Sämtliche Arbeiten dürfen nur von dafür qualifiziertem und befugtem Personal durchgeführt werden. Qualifiziert ist Personal, das regelmäßig für die jeweiligen Arbeiten geschult, ausgebildet oder darin unterwiesen worden ist und dieses durch entsprechende Bescheinigungen oder Nachweise belegen kann.

Für das Bedienen des Geräts sind folgende Qualifikationen erforderlich:

- Der Bediener hat die zugehörige Bedienungsanleitung gelesen und verstanden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.
- Der Bediener bedient das Gerät über die Kabel-Fernbedienung.

Für das Montieren, Anschließen, in Betrieb nehmen, Warten, außer Betrieb nehmen sind folgende Qualifikationen erforderlich:

- Das Montage und Wartungspersonal hat die zugehörige Montage- und Wartungsanleitung einschließlich der mitgeltenden Unterlagen gelesen und verstanden, insbesondere die darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise.
- Das Montage- und Wartungspersonal ist Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik mit entsprechender Qualifikation.
- Das Montage- und Wartungspersonal kann Sachkenntnis gemäß VDE 100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und VDI 6022 (Raumluftechnik, Raumlufqualität – Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln)) nachweisen.

Für sämtliche Arbeiten an und mit elektrischen Bauteilen ist Elektro-Fachpersonal mit folgenden Qualifikationen erforderlich:

- Das Elektro-Fachpersonal kann Anschlüsse im Niederspannungsbereich fachgerecht herstellen.
- Das Elektro-Fachpersonal kann Informationen aus Schaltplänen verstehen und umsetzen.

### **Persönliche Schutzausrüstung**

Bei Montage und Wartung des Geräts können Gefahren auftreten.


- ▶ Tragen Sie bei allen Arbeiten mit und am Gerät geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Beachten und befolgen Sie bei der Zusammenstellung der Schutzausrüstung Folgendes:
  - die Bestimmungen am Einsatzort
  - die Angaben in den mitgeltenden Unterlagen, insbesondere in den Sicherheitsdatenblättern für die verwendeten Medien

Geeignete Schutzausrüstung enthält folgende Bestandteile:

- chemikalienbeständige Schutzhandschuhe
- chemikalienbeständige Schutzbrille.

### **Warn- und Hinweisschilder**

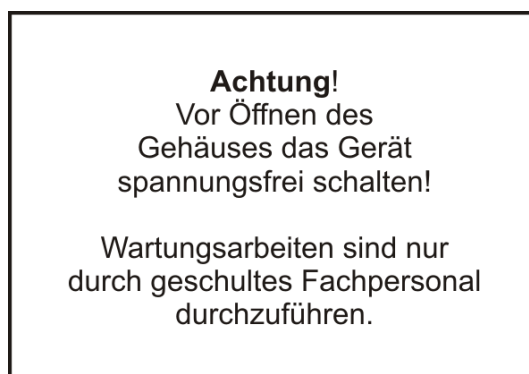


Auf der Rückseite ist folgender Aufkleber am Gerät angebracht.



## **Verbot eigenmächtiger Umbauten**

Unzulässige Umbauten oder Veränderungen am Gerät können zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen. Dies gilt für das Verändern der elektrischen sowie der mechanischen Komponenten. Ohne Rücksprache mit dem Hersteller dürfen keine Umbauten oder Veränderungen am Gerät durchgeführt werden.

### Gestaltungsmerkmale von Warnhinweisen

<b>⚠ GEFÄHR</b>	
	Hinweise mit dem Wort GEFÄHR warnen vor einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
<b>⚠ WARNUNG</b>	
	Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen vor einer gefährlichen Situation, die möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
<b>⚠ VORSICHT</b>	
	Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen vor einer Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

### Gestaltungsmerkmale von Hinweisen auf Sachschäden

<b>ACHTUNG!</b>	
	Diese Hinweise warnen vor einer Situation, die zu Sachschäden und eingeschränkter Funktionalität führen kann.

# Beschreibung

## Aufgabe und Funktion

### Aufgabe

Die Sekundärluftkühlgeräte Hepa Jet Smart W regulieren die Temperatur der Umgebungsluft in einem Raum. Hierfür werden sie unter der Decke montiert. Die Geräte erfüllen dabei die hygienischen Anforderungen für Raumklasse II folgender Normen und Richtlinien:

- VDI 6022, Januar 2018:  
Raumluftechnik, Raumlufqualität Hygieneanforderungen an raumluftechnische Anlagen und Geräte (VDI-Lüftungsregeln)
- DIN 1946-4, Juni 2018 Raumluftechnik –Teil 4:  
Raumluftechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens.

### Funktionsweise


Die Sekundärluftkühlgeräte Hepa Jet Smart W saugen die Umgebungsluft durch im Gerät vorhandene geräuscharme EC-Ventilatoren an (EC = electronically commutated, elektronisch geregelt). Die Umgebungsluft wird zunächst durch den Abluftfilter (Filterstufe 1) geleitet. Dieser entspricht der Filtergruppe ISO ePM1  $\geq 65\%$  gemäß ISO 16890 (ehemals Filterklasse F7 gemäß EN 779). Anschließend wird sie durch den Wärmetauscher auf die eingestellte Temperatur gebracht. Bevor die Luft wieder in den Raum gelangt wird sie durch den Zuluftfilter (Filterstufe 2) geleitet. Dieser entspricht der Filtergruppe ISO ePM1  $\geq 80\%$  gemäß ISO 16890 (ehemals Filterklasse F9 gemäß EN 779).


Die Luftmenge wird hierbei durch die Drehzahl der EC-Ventilatoren geregelt.

Für das Bedienen des Geräts steht eine Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung zur Verfügung. Alternativ kann das Gerät über eine vorhandene Gebäudeleittechnik (GLT) betrieben werden.

Das Gerät wird an ein vorhandenes Kaltwassernetz angeschlossen. Im Kaltwassernetz wird reines Wasser oder ein Wasser/Glykologemisch verwendet. Es ist geeignet für Einzelräume von kleiner bis mittlerer Größe. Der Luftvolumenstrom beträgt je nach Typ etwa 250-1300 m<sup>3</sup>/h.

## Geräteübersicht

 Die Pfeile in der Abbildung geben die Richtung des Luftstroms an.

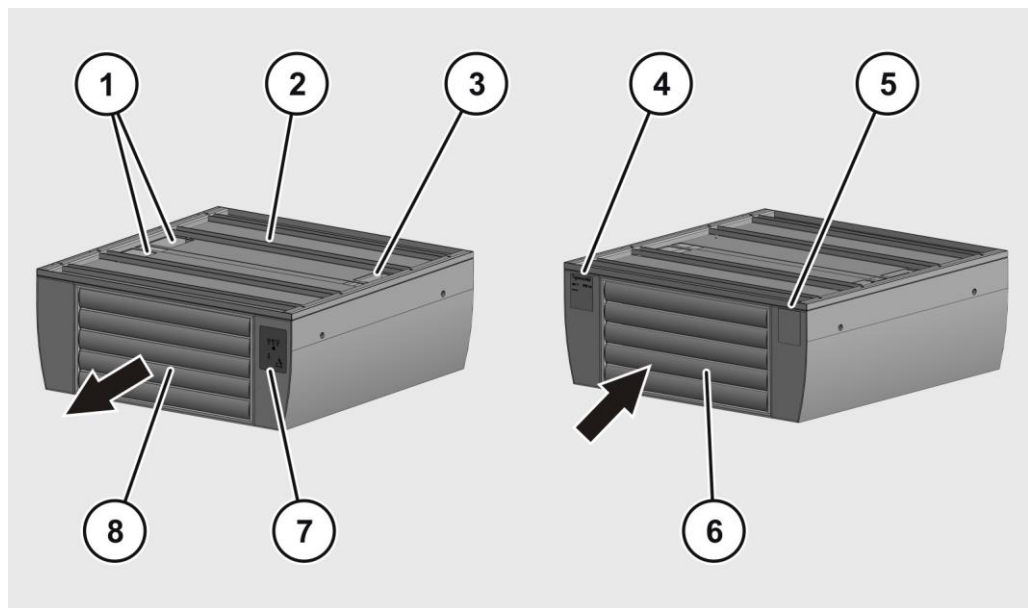


Nr.	Erläuterung
1	Öffnung für Anschlüsse flüssiger Medien
2	Montageplatte
3	Öffnung für elektrischen Anschluss
4	Typenschild
5	Warnaufkleber
6	einstellbare Lamellen (Luftleitlamellen) am Lufteinlass
7	Meldeleuchten
8	einstellbare Lamellen am Luftauslass

Am Lufteinlass (6) ist der Abluftfilter Iso ePM1 65% (F7) angebracht. Am Luftauslass (8) ist der Zuluftfilter Iso ePM1 80% (F9) angebracht.


## Regelventil mit Ventilantrieb

Für eine kontrollierte Wasserzufuhr wird ein Regelventil mit Ventilantrieb in der Kaltwasserzuleitung installiert. In Abhängigkeit von der Funktionsweise des vorhandenen Kaltwassernetzes kommt entweder das Durchgangsventil VVP47.15-2.5 oder das Dreiwegeventil mit Bypass VMP47.15-2.5 von Siemens zum Einsatz. Für das Durchgangsventil wird ein Siemens Verschraubungs-Set ALG..2, für das Dreiwegeventil werden zwei Verschraubungs-Sets ALG..2 benötigt. Die Ventile werden jeweils mit dem Ventilantrieb STP73 von Siemens angesteuert.

 Eine Übersicht über die Regelventile und den Ventilantrieb finden Sie im Anhang ab Seite 64.

## Kabel-Fernbedienung im Gerät


Wenn das Gerät mit der optionalen Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden soll, kann die Bedieneinheit der Kabel-Fernbedienung (1) an der Vorderseite des Geräts installiert werden. Die Kabel-Fernbedienung beinhaltet den Empfänger für die Infrarot-Fernbedienung.

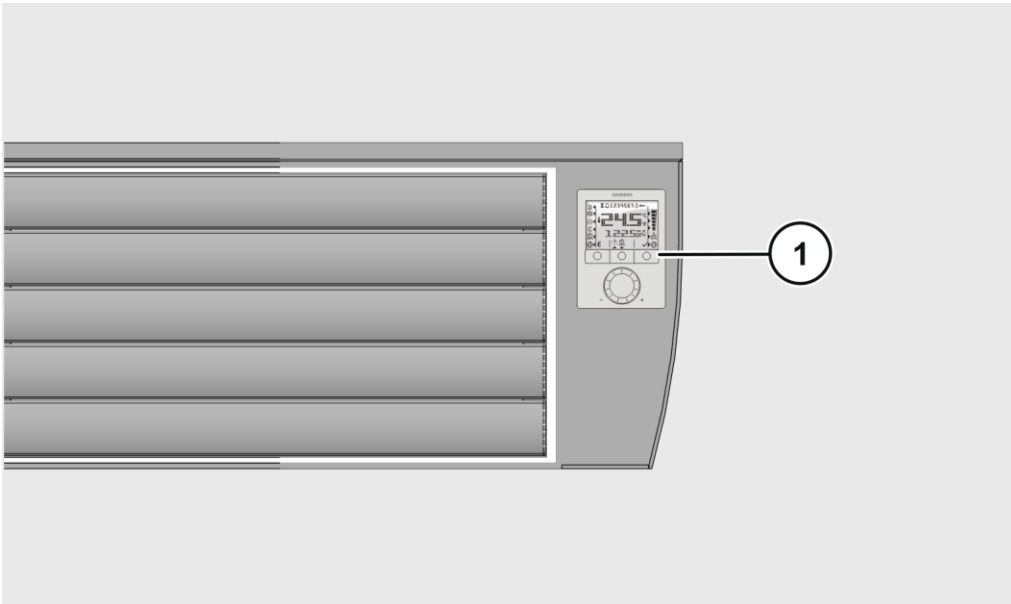



## Übersicht Infrarot-Fernbedienung


Die Infrarot-Fernbedienung kann zusätzlich zur Kabelfernbedienung verwendet werden.

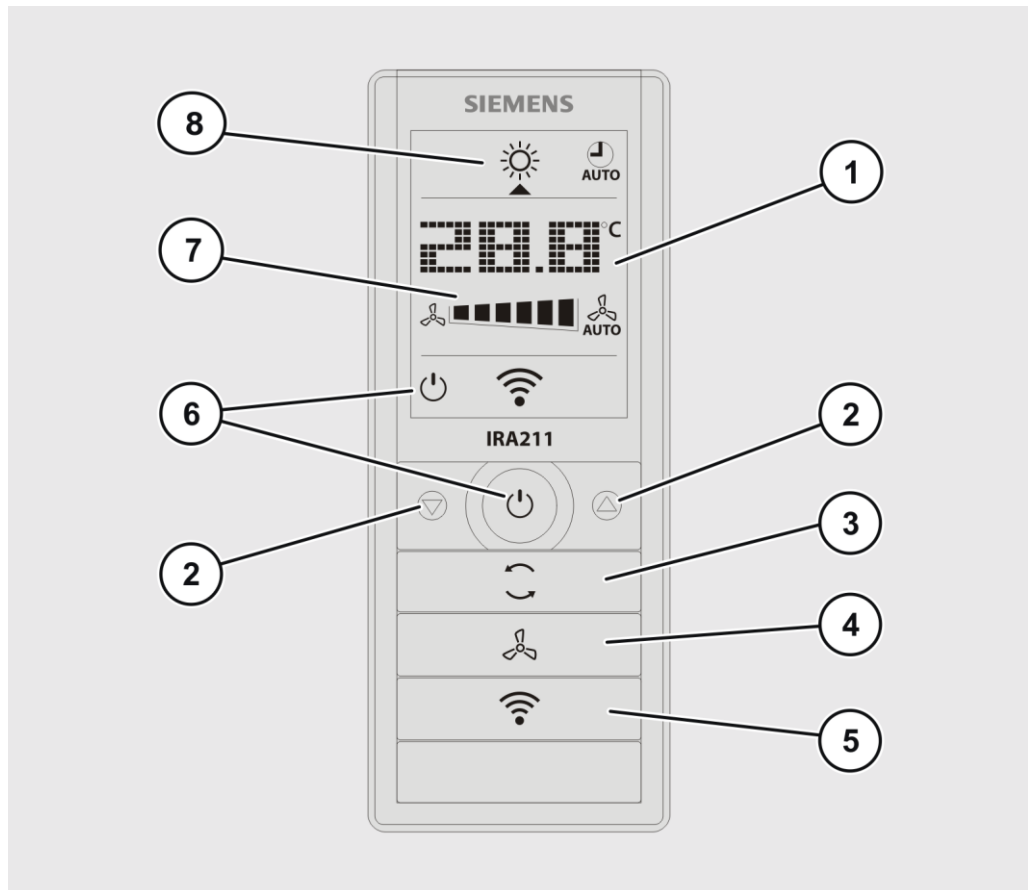

Nr.	Erläuterung
1	Raumtemperatur Sollwert
2	Einstellung des Temperatursollwerts im Normalbetrieb
3	Auswahl Betriebsart: Komfortbetrieb oder Schutzbetrieb
4	Auswahl Ventilatorstufe: Automatisch oder manuelle Ventilatorstufenwahl
5	Nochmaliges Senden der aktuellen Einstellung
6	Betriebsbereitschaft oder EIN
7	Ventilatorstatus
8	Normalbetrieb/Auto Zeitschaltprogramm

**i** Das Bedienen des Geräts mit der Fernbedienung ist in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.


## Übersicht Kabel-Fernbedienung

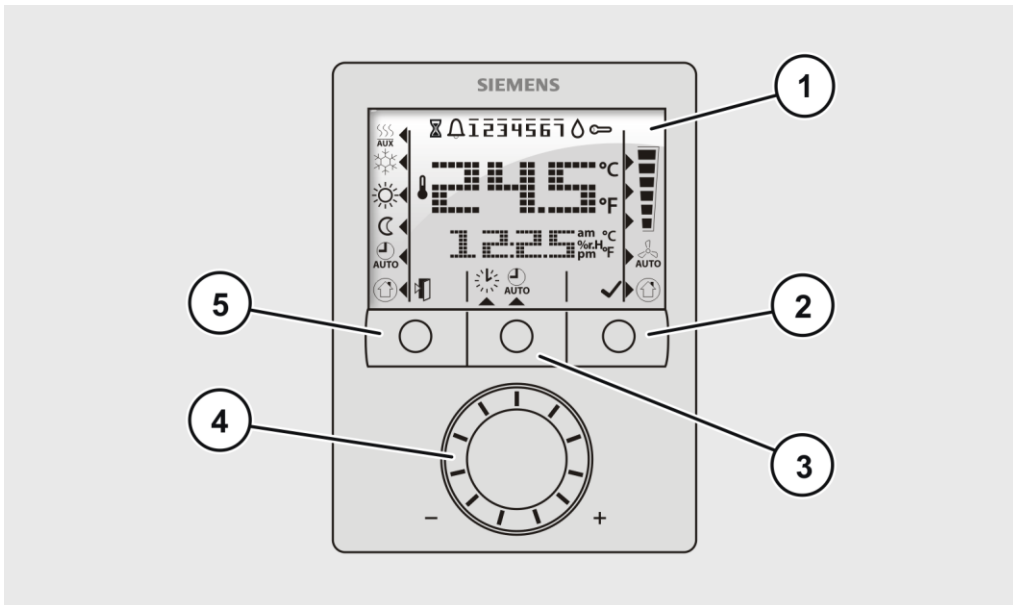

Nr.	Erläuterung
1	Display
2	Ventilator-taste
3	Programm-taste
4	Drehknopf
5	Betriebsart-taste (Komfortbetrieb oder Schutzbetrieb)

ⓘ Das Bedienen des Geräts mit der Fernbedienung ist in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

## Übersicht Display Kabel-Fernbedienung

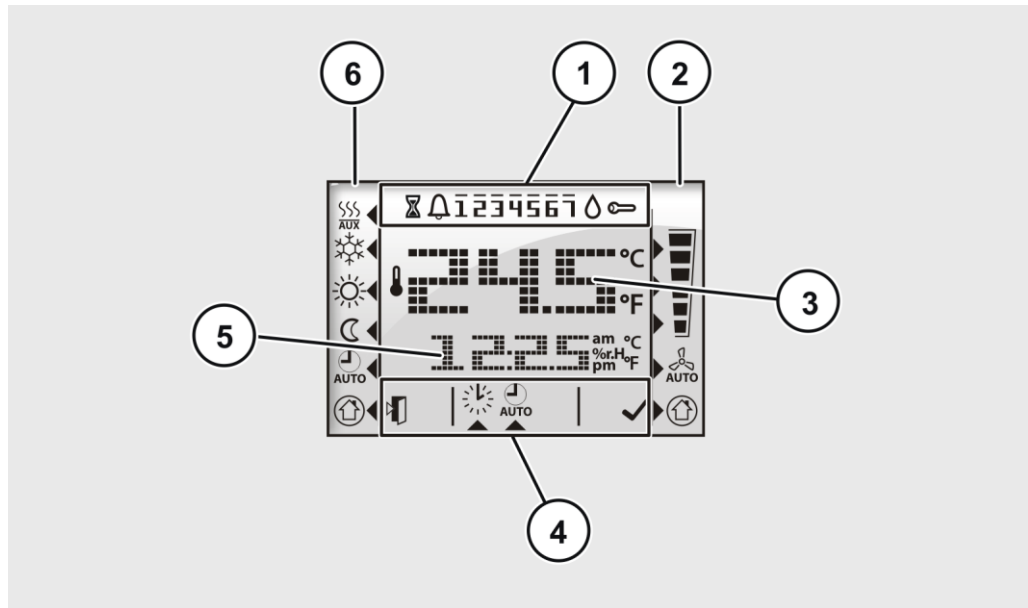

Nr.	Erläuterung
1	Meldungen und Anzeige von Wochentagen (1-7)
2	Anzeige der aktuellen Ventilatorstufe
3	Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
4	Tastenfunktion und Zeit-Einstellungen
5	Anzeige der aktuellen Uhrzeit oder eines Fehlercodes
6	Anzeige der aktuellen Betriebsart (Komfortbetrieb oder Schutzbetrieb)

**i** Die Anzeigen auf dem Display der Fernbedienung sind in einer separaten Bedienungsanleitung beschrieben.

## Angaben im Typenschild

Das Typenschild ist auf der Rückseite des Geräts aufgeklebt. Es enthält folgende Angaben:

- Hersteller
- Herstelleradresse
- Telefonnummer des Herstellers
- Typ
- Liefernummer
- Nennspannung
- max. Leistungsaufnahme
- max. Stromaufnahme
- Luftleistung Stufe 1
- Luftleistung Stufe 2
- Filterstufe 1, Wirkungsgrad
- Filterstufe 2, Wirkungsgrad
- CE-Zeichen.
- Kälteleistung
- Vorlauftemperatur
- Rücklauftemperatur
- Anschluss VL/VR.
- Schalldruckpegel
- Druckabfall des Wärmetauschers
- Wassermenge [l/min]

## Gerät transportieren und lagern

Das Gerät wird auf einer Einwegpalette in Karton verpackt geliefert. Es wiegt einschließlich Transportverpackung etwa 90 kg. Die Abmessungen der Transportverpackung betragen etwa 970 mm × 970 mm × 740 mm.

- ▶ Transportieren Sie das Gerät nach der Lieferung mit z. B. einem Hubwagen zum Montage- oder Lagerort.

Lagern Sie das Gerät in seiner Transportverpackung an einem trockenen Ort und einer Temperatur von +5 °C bis +45 °C. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 25 bis 85 % betragen (nicht kondensierend).



## Gerät montieren

### Bedingungen am Montageort

Das Gerät ist ausschließlich für die Montage im Innenbereich geeignet.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass folgende Umgebungsbedingungen am Montageort eingehalten werden:
    - min. 16 °C (80 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
    - max. 45 °C (65 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
  - ▶ Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen am Montageort eingehalten werden:
    - Der Raum, in dem das Gerät montiert wird, muss der Raumklasse 2 nach DIN 1946-4, Juni 2018 entsprechen.
    - Die Decke, an der das Gerät befestigt werden soll, muss für das Gewicht des Geräts geeignet ist. Sollten Zweifel bestehen, fragen Sie eine fachkundige Person.
    - Die Anschlüsse für erforderliche Medien und die elektrische Versorgung müssen vorhanden sein.
    - Das Gerät muss einen Sicherheitsabstand von 1 m zu anderen elektrischen oder elektronischen Geräten haben.
    - Im direkten Luftstrom am Luftauslass dürfen sich keine Personen aufhalten.
- ⓘ Falls Unklarheiten bestehen sollten, nehmen Sie Kontakt mit OP-AIR auf.

### Mindestabstände zu den Wänden

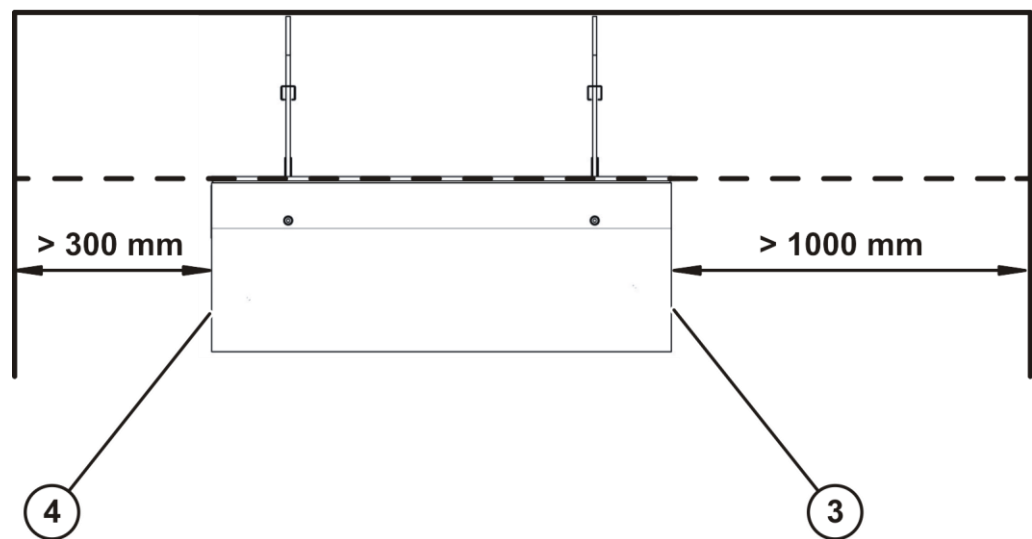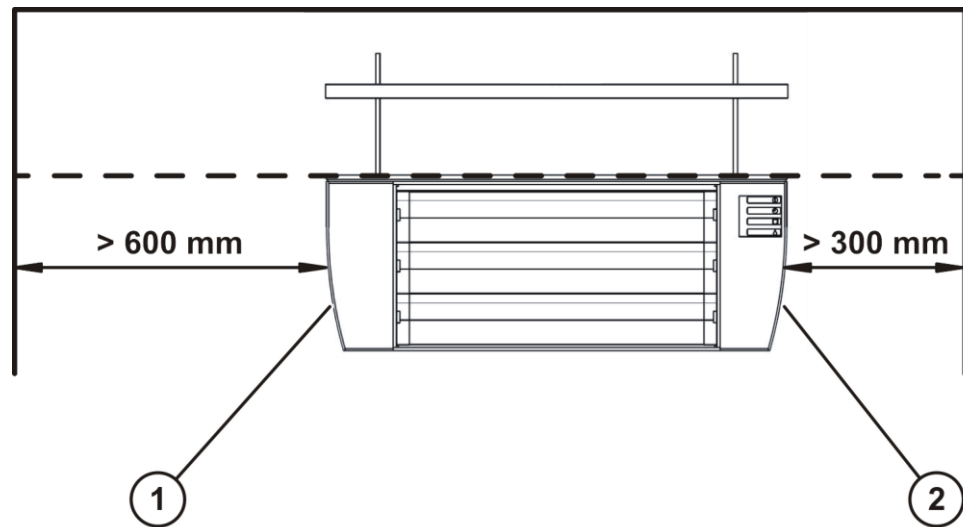

Nr.	Erläuterung
1	linke Seite (Medien-Anschlussseite)
2	rechte Seite
3	vordere Seite (Luftauslass)
4	hintere Seite (Lufteinlass)

## Montage vorbereiten

### Auspacken und Lieferumfang prüfen

Das Gerät wird auf einer Einwegpalette in Karton verpackt geliefert. Um das Gerät auszupacken, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie den Karton.
- ▶ Entfernen Sie den Karton und evtl. vorhandenes Füllmaterial.
- ▶ Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den am Einsatzort geltenden Richtlinien und Vorschriften.

Um den Lieferumfang zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang anhand der Beipackliste auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
  - ▶ Informieren Sie bei Abweichungen den Hersteller.
  - ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang auf eventuelle sichtbare Beschädigungen.
  - ▶ Falls Sie einen Schaden feststellen sollten, fotografieren Sie den Schaden.
  - ▶ Melden Sie den Schaden mit Angabe der Serien- oder Lieferscheinnummer umgehend dem Hersteller.
- ⓘ Befestigungsmaterial für die Deckenmontage ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Benötigte Werkzeuge, Hilfsmittel und Befestigungsmittel



Für die Montage des Geräts benötigen Sie Folgendes:

- Bohrmaschine
- Bohrer
- Wasserwaage
- einen Satz Schraubenschlüssel
- Innensechskantschlüssel 6 mm
- einen Montagelift
- geeignete Dübel
- ggf. Montageschienen bei Holzdecken
- 4 Gewindestangen oder Gewindestifte, mindestens M8 x 50 mm
- 4 Unterlegscheiben für M8
- 8 selbstsichernde Muttern M8.



## Montage an einer Decke durchführen

### Löcher bohren

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.</li> </ul>
<b>⚠️ VORSICHT</b>	
	<p>Bohrstaub kann Augenverletzungen verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tragen Sie beim Bohren von Löchern eine Schutzbrille.</li> </ul>

Um die benötigten Löcher zu bohren, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Halten Sie die Mindestabstände zu den Wänden ein, siehe Seite 23.
- ▶ Positionieren Sie die mitgelieferte Bohrschablone an der Decke.
- ▶ Bohren Sie die auf der Bohrschablone markierten Löcher in die Decke.
- ▶ Entfernen Sie die Bohrschablone.
- ▶ Setzen Sie geeignete Dübel in die Löcher ein.

**Gerät für Montage vorbereiten**


① Im Lieferzustand sind die beiden Seitengehäuse nicht montiert.

Um das Gerät für die Montage vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

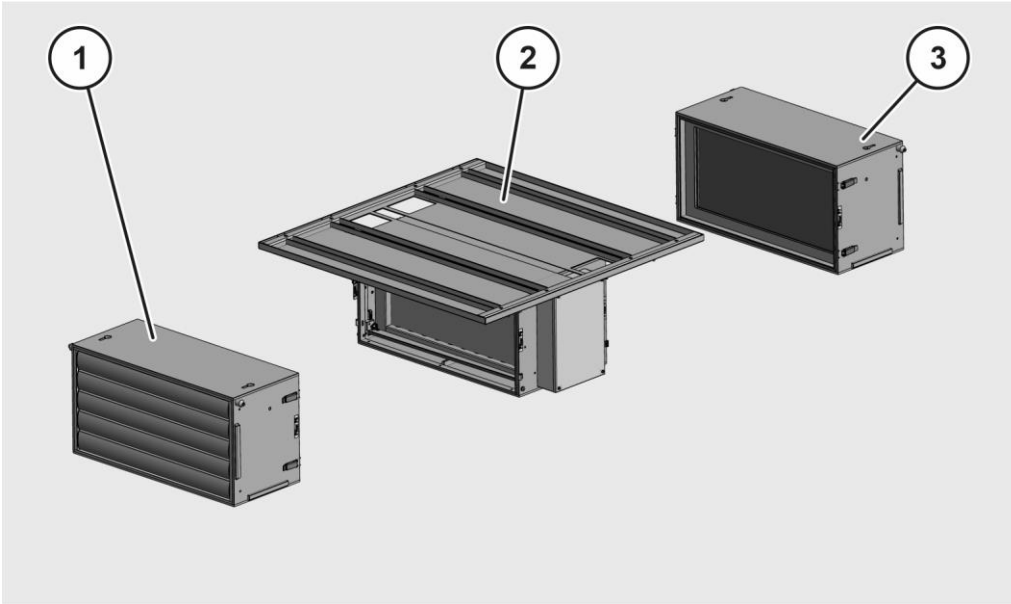

- ▶ Entfernen Sie das Filtergehäuse F9 (1) vom Gerät (2), siehe Seite 49.
- ▶ Entfernen Sie das Filtergehäuse F7 (3) vom Gerät (2), siehe Seite 49.

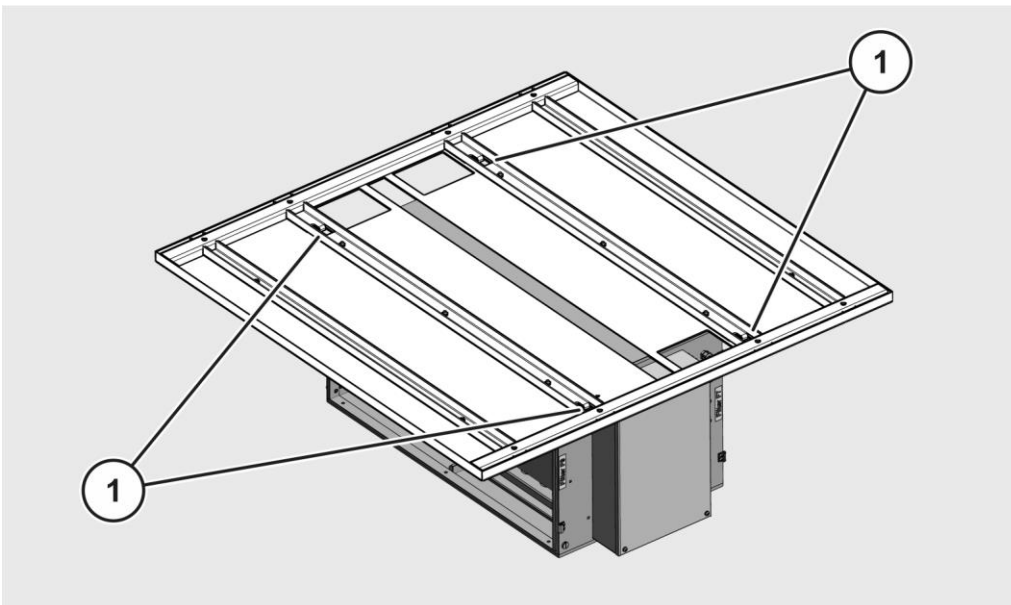

Die Befestigungslöcher (1) sind nun frei zugänglich.




**Gerät montieren**

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch Herabfallen des Geräts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie für die Montage des Geräts einen Montagelift.</li> <li>▶ Halten Sie sich nicht unter dem angehobenen Gerät auf.</li> </ul>
<b>⚠️ VORSICHT</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.</li> </ul>

Um das Gerät zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schrauben Sie die Gewindestangen bzw. die Gewindestifte in die eingesetzten Dübel.
- ▶ Platzieren Sie das vorbereitete Gerät auf einem Montagelift.
- ▶ Heben Sie das Gerät mit dem Montagelift in die Montageposition.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Medienanschlüsse durch die dafür vorgesehene Öffnung in der Montageplatte geführt werden.
- ▶ Richten Sie das Gerät mit den Löchern in der Montageplatte an den eingesetzten Gewindestangen bzw. Gewindestiften aus.
- ▶ Befestigen Sie das Gerät zunächst mit einer Scheibe (1) und einer Mutter (2) pro Gewindestange (4) bzw. Gewindestift.
- ▶ Sichern Sie die Schraubverbindungen jeweils mit einer Kontermutter (3)

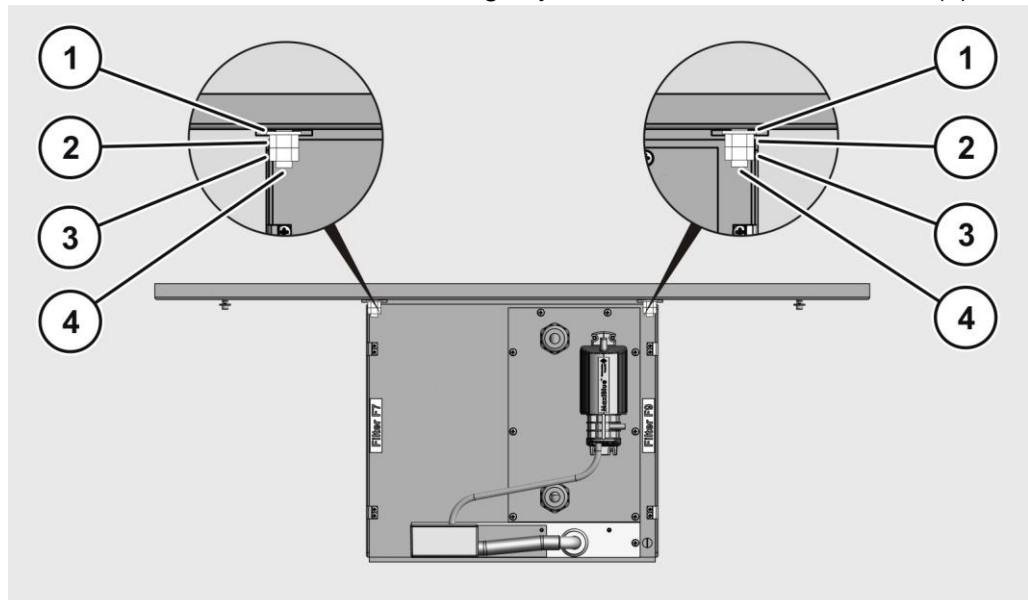


## Durchgangsventil und Ventilantrieb montieren

Der Ventilantrieb wird mit einem konfektionierten Kabel von 1 m Länge an das Kühlgerät angeschlossen.

► Montieren Sie das Ventil deshalb in ausreichender Nähe zum Kühlgerät.

ⓘ Bauen Sie einen Schmutzfänger vor dem Ventil ein. Die Funktionssicherheit wird dadurch erhöht.

Die für das Durchgangsventil geltende Fließrichtung wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Kennzeichnungen A und AB finden sich auch auf dem Ventil.

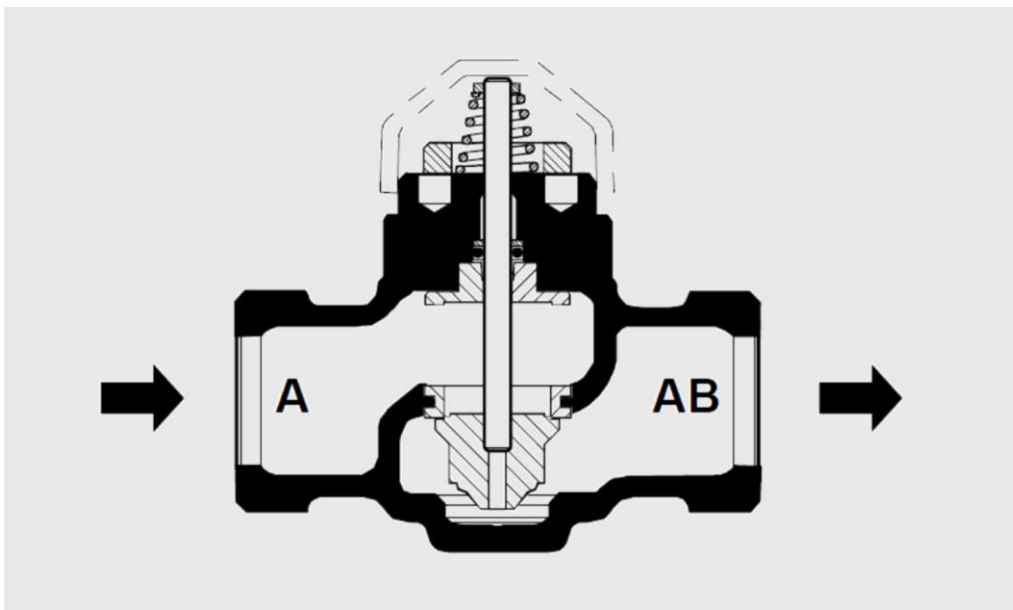

Symbol	Erläuterung
➔ A	Anschluss für Vorlauf vom Kälteerzeuger
AB ➔	Anschluss für Vorlauf zum Wärmetauscher


- Verwenden Sie das Siemens Verschraubungs-Set ALG..2 für die Installation des Durchgangsventils.
- Installieren Sie das Ventil entsprechend der mitgelieferten Herstelleranweisungen.
- Führen Sie eine Leckageprüfung durch.
- Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.
- Installieren Sie den Ventilantrieb entsprechend der mitgelieferten Herstelleranweisungen.

### Dreizehventil und Ventilantrieb montieren

Der Ventilantrieb wird mit einem konfektionierten Kabel von 1 m Länge an das Kühlgerät angeschlossen.

► Montieren Sie das Ventil deshalb in ausreichender Nähe zum Kühlgerät.

- ① Bauen Sie einen Schmutzfänger vor dem Ventil ein. Die Funktionssicherheit wird dadurch erhöht.
- ① Beachten Sie, dass das Dreizehventil mit einer anderen als der in den Siemens-Unterlagen vorgegebenen Fließrichtung verwendet wird. Die für das Gerät benötigte Fließrichtung zeigt die folgende Abbildung. Die Kennzeichnungen A, B und AB finden sich auch auf dem Ventil.

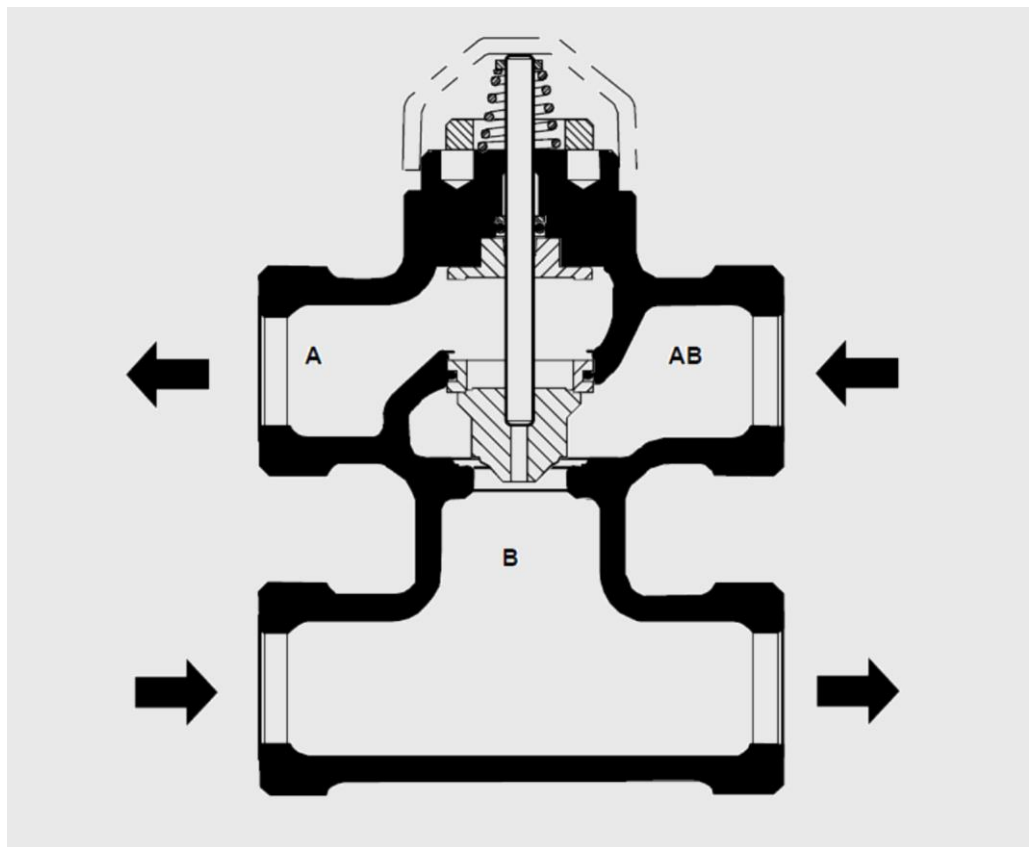



Symbol	Erläuterung
← A	Anschluss für Vorlauf zum Wärmetauscher
AB ←	Anschluss für Vorlauf vom Kälteerzeuger
→ B	Anschluss für Rücklauf vom Wärmetauscher
B →	Anschluss für Rücklauf zum Kälteerzeuger

- ▶ Verwenden Sie zwei Siemens Verschraubungs-Sets ALG..2 für die Installation des Dreiwegeventils.
- ▶ Installieren Sie das Ventil entsprechend der mitgelieferten Herstelleranweisungen. Beachten Sie dabei die von OP-Air vorgeschriebene, geänderte Fließrichtung.
- ▶ Führen Sie eine Leckageprüfung durch.
- ▶ Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.
- ▶ Installieren Sie den Ventilantrieb entsprechend der mitgelieferten Herstelleranweisungen.

## Gerät anschließen


### Anschluss an das Kaltwassernetz herstellen

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch den Kontakt mit Kältemittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten.</li> <li>▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Kältemittel kommen könnten.</li> <li>▶ Tragen Sie eine chemikalienbeständige Schutzbrille.</li> </ul>
<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.</li> </ul>

Die Anschlüsse für die Kaltwasserversorgung am Wärmetauscher bestehen jeweils aus einem 1/2" AG Gewinde für Ein- und Ausgang.

Um das Gerät an die Kaltwasserversorgung anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Schließen Sie die Kaltwasserversorgung für den Registervorlauf an den Anschluss (1) an.
- ▶ Schließen Sie die Kaltwasserversorgung für den Registerrücklauf an den Anschluss (2) an.
- ▶ Führen Sie eine Leckageprüfung durch.
- ▶ Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse und das Kühlsystem dicht sind.

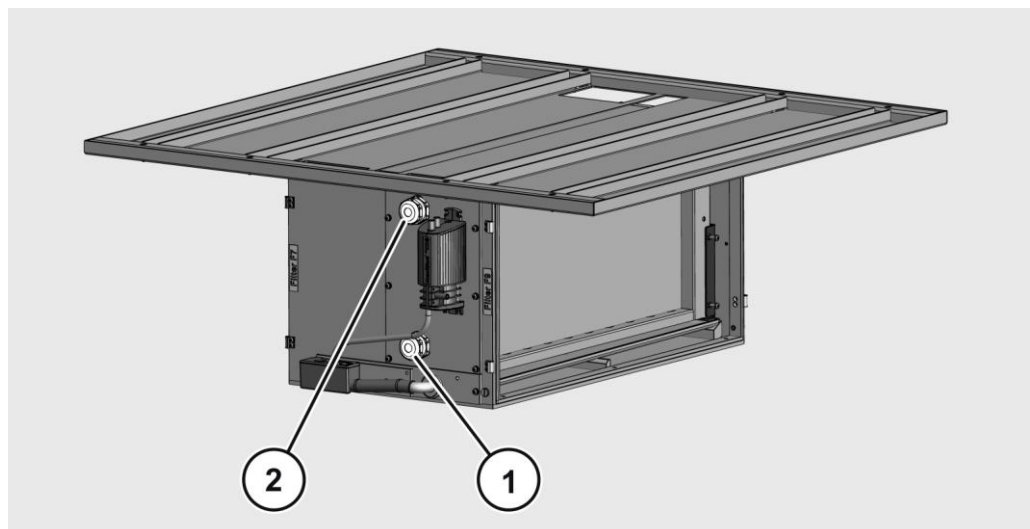

### Abflussleitung für Tauwasser anschließen


Um die Abflussleitung für das Tauwasser anzubringen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Befestigen Sie einen 6 - 8 mm PVC-Schlauch mit einer Schlauchschelle an dem Ausgang der Kondensatpumpe (1).
- ▶ Führen Sie eine Leckageprüfung durch.
- ▶ Beseitigen Sie ggf. vorhandene Leckagen.

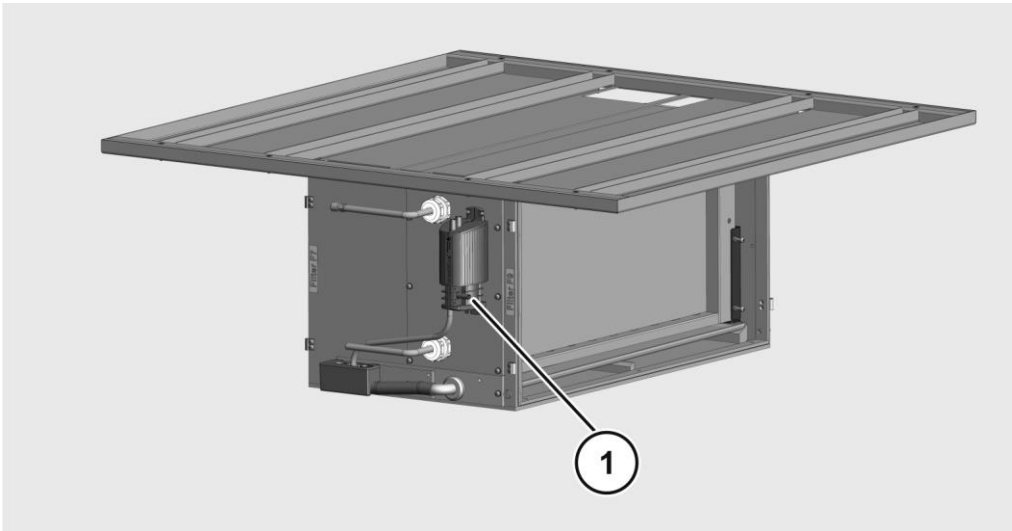




## Elektrischen Anschluss herstellen

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Schwere oder tödliche Verletzungen durch Kontakt mit spannungsführenden Teilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur durch Elektro-Fachpersonal durchführen.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn von Arbeiten spannungsfrei.</li> <li>▶ Prüfen Sie vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Komponenten diese auf elektrische Spannung und mögliche Restladungen.</li> <li>▶ Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur unter Aufsicht einer zweiten Person durch.</li> </ul>

Der elektrische Anschluss des Geräts erfolgt an der Klemmenleiste (1). Um den Netzanschluss für das Gerät herzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Nehmen Sie den elektrischen Anschluss nach den Vorgaben der aktuellen VDE 100 vor.
- ▶ Schließen Sie das Gerät gemäß gültigem Elektro-Schaltplan an eine Netzspannung von 230 V, 50 Hz an.
- ▶ Installieren Sie einen geeigneten Überspannungsschutz.
- ▶ Erden Sie das Gerät über den Schutzleiter.

Die Klemmenbelegung ist auf dem Deckel des Anschlusskastens dargestellt.

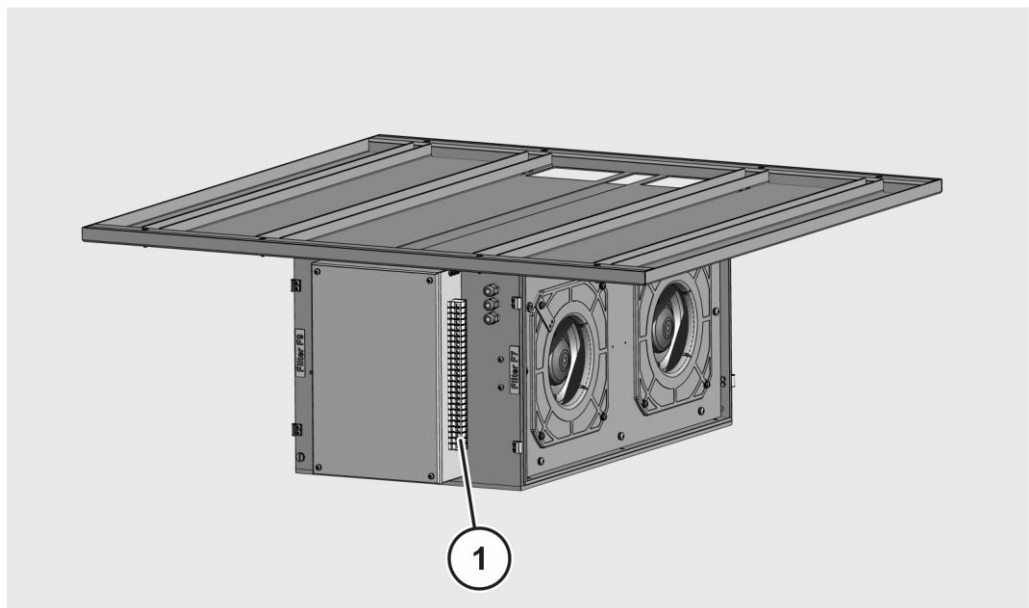

- ⓘ Wenn die Siemens Kabel-Fernbedienung werkseitig an der Vorderseite des Geräts installiert wurde, ist der elektrische Anschluss bereits hergestellt.

Die Siemens Kabel-Fernbedienung wird mit einem 10 m langen, vorkonfektionierten Kabel geliefert. Das Kabel besteht aus farbcodierten Einzeladern. An einem Ende ist es mit einem Stecker versehen.

Um die Kabel-Fernbedienung anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Befestigen Sie die Kabel-Fernbedienung an einer gut zugänglichen Stelle innerhalb des Raums.
- ▶ Schließen Sie das vorkonfektionierte Kabel mit dem Stecker an die entsprechende Buchse neben der Klemmleiste des Geräts an.
- ▶ Schließen Sie die farbcodierten Einzeladern des Kabels gemäß gültigem Elektro-Schaltplan an die Schraubklemmen der Kabel-Fernbedienung an (siehe Anhang ab Seite 64).

Um den Ventiltrieb anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schließen Sie den Ventiltrieb entsprechend des mitgelieferten Elektro-Schaltplan an das Gerät an (siehe Anhang ab Seite 64).

## Gerät für die Inbetriebnahme vorbereiten

### Filter F7 in Filtergehäuse F7 einsetzen

#### **ACHTUNG!**

- Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.
- ▶ Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.
  - ▶ Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.


**i** Das Filtergehäuse F7 ist mit einem Aufkleber „F7“ gekennzeichnet.

▶ Demontieren Sie den Lamellenrahmen, siehe Seite 51.


Um den Filter F7 (1) in das Filtergehäuse F7 (2) einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Reinigen Sie das Filtergehäuse, siehe Seite 44.
- ▶ Nehmen Sie den Filter F7 aus seiner Verpackung.
- ▶ Setzen Sie den Filter F7 in das Filtergehäuse ein.

Die umlaufende Dichtung (3) am Filter muss hierbei in Richtung Gehäuse weisen.

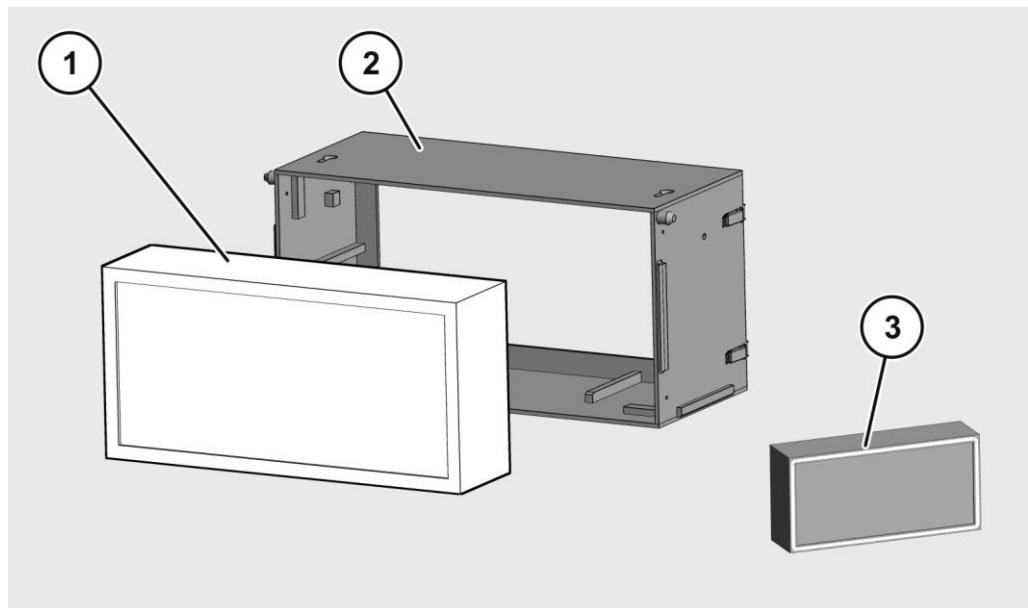

- ▶ Setzen Sie die vier Montageecken (2) ein.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben der Montageecken mit einem Schlitz-Schraubendreher über Kreuz handfest an.
- ▶ Montieren Sie den Lamellenrahmen, siehe Seite 51.
- ▶ Montieren Sie das Filtergehäuse (1) am Gerät, siehe Seite 49.

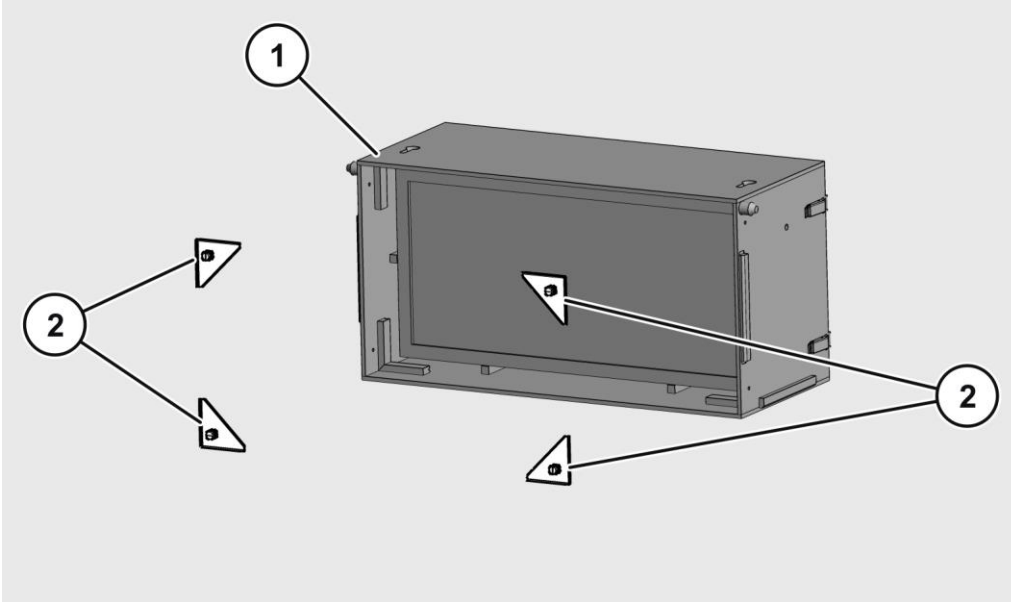

## Filter F9 in Filtergehäuse F9 einsetzen

### **ACHTUNG!**

- Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.
- ▶ Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.
  - ▶ Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.


**i** Das Filtergehäuse F9 ist mit einem Aufkleber „F9“ gekennzeichnet.

▶ Demontieren Sie den Lamellenrahmen, siehe Seite 51.


Um den Filter F9 (1) in das Filtergehäuse F9 (2) einzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Reinigen Sie das Filtergehäuse, siehe Seite 44.
- ▶ Nehmen Sie den Filter F9 aus seiner Verpackung.
- ▶ Setzen Sie den Filter F9 in das Filtergehäuse ein.

Die umlaufende Dichtung am Filter (3) muss hierbei in Richtung Gehäuse weisen.

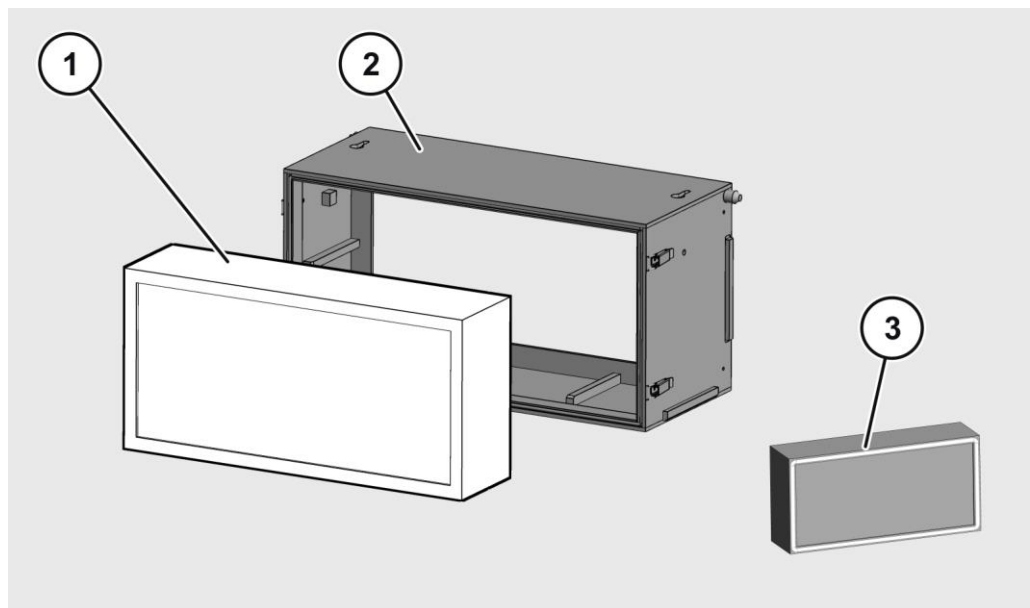


- ▶ Setzen Sie die vier Montageecken (2) ein.
- ▶ Ziehen Sie die Schrauben der Montageecken mit einem Schlitz-Schraubendreher über Kreuz handfest an.
- ▶ Montieren Sie den Lamellenrahmen, siehe Seite 51.
- ▶ Montieren Sie das Filtergehäuse (1) am Gerät, siehe Seite 49.

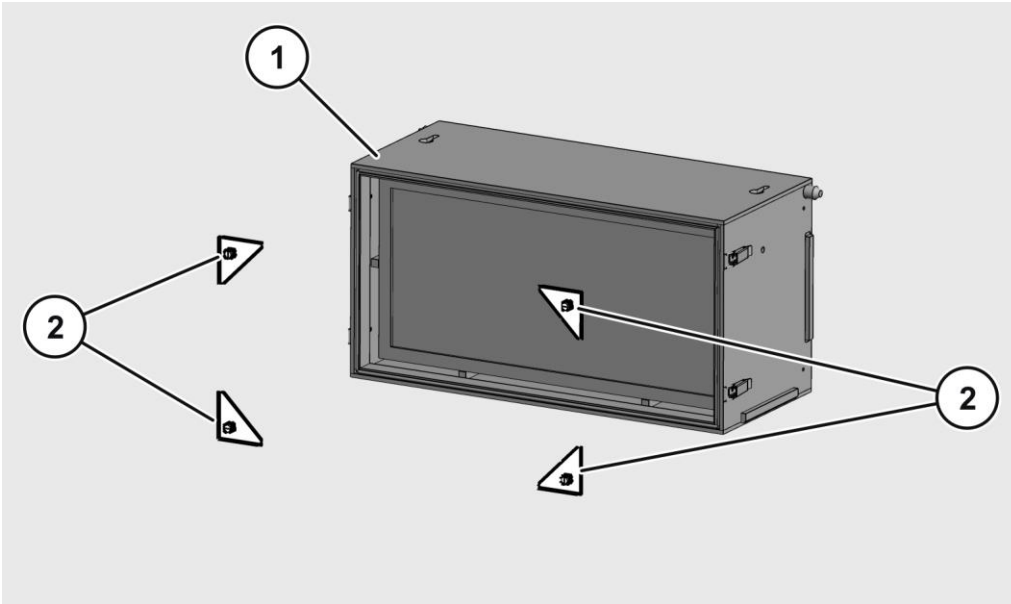

## Seitengehäuse montieren

① Das Montieren des rechten und linken Seitengehäuses ist identisch.

<b>⚠ VORSICHT</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.</li> </ul>

Die Seitengehäuse (1, 3) werden jeweils an zwei Stellen des Geräts befestigt. Um ein Seitengehäuse zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

▶ Reinigen Sie die Seitengehäuse, siehe Seite 44.


An jedem Seitengehäuse ist ein Sicherungsseil mit einem Karabinerhaken befestigt. Dies verhindert beim Demontieren ein unbeabsichtigtes Herabfallen.

▶ Hängen Sie die Öse des Sicherungsseils über die dafür vorgesehene Schraube (5).

▶ Setzen Sie das Seitengehäuse auf.

▶ Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel SW 6 in die Öffnung (4) und drehen Sie die Verriegelung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.

▶ Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öffnung.

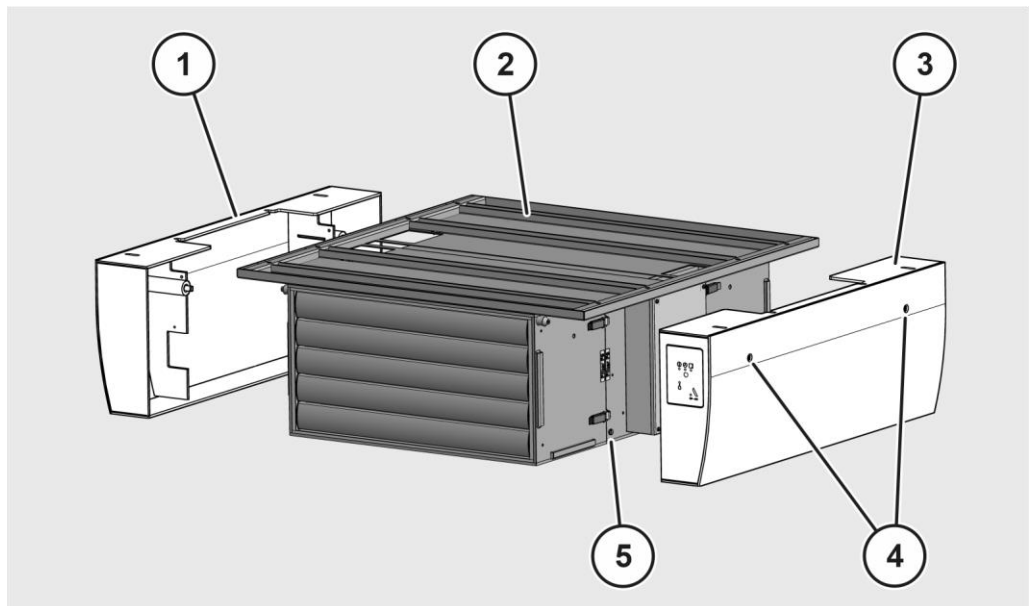

## Lamellen einstellen

### VORSICHT




Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.

- ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.

Um die Richtung des Luftstroms am Gerät einzustellen, können Sie die Lamellen (1) im Lamellenrahmen einstellen.

- ▶ Bewegen Sie die Lamellen mit der Hand in die gewünschte Richtung.

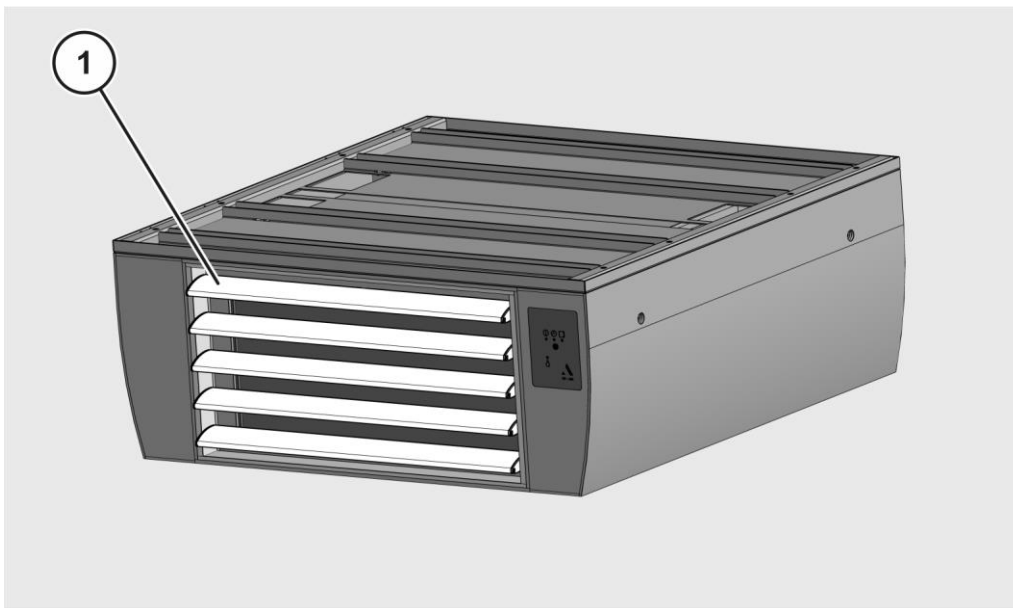




## Gerät in Betrieb nehmen

Führen Sie vor der Inbetriebnahme Folgendes durch:

- ▶ Falls noch nicht geschehen, reinigen Sie das Gerät, siehe Seite 44.
- ① Beachten und befolgen Sie die Vorgaben für die Inbetriebnahme des vorhandenen Kaltwassernetzes.
- ① Soll das Gerät ohne die Siemens Steuerung betrieben werden, erfolgt die Inbetriebnahme im Zusammenhang mit der Gebäudeleittechnik (GLT).

Um das Gerät mit der Kabel-Fernbedienung in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig gereinigt wurde.
- ▶ Schalten Sie das Gerät an der Kabel-Fernbedienung mit der Taste (1) ein.
- ▶ Das Bedienen des Geräts entnehmen Sie der zugehörigen Bedienungsanleitung bzw. den mitgeltenden Unterlagen.

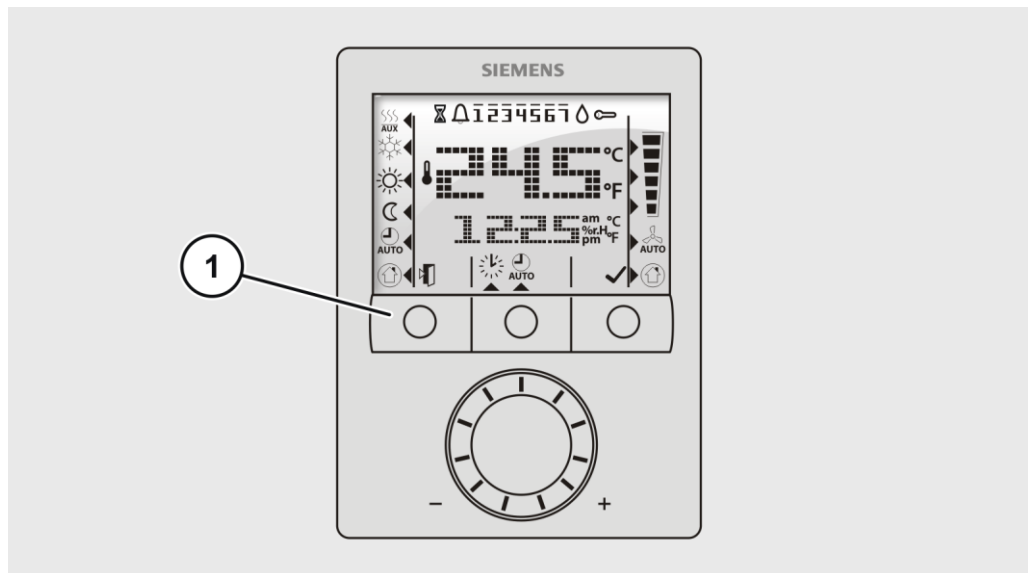

In den Einstellungen des Geräts können Sie einzelne Parameter ändern, wie auf Seite 42 beschrieben. Die voreingestellten Werte entnehmen Sie bitte den Tabellen auf Seite 70f.

### Ventilatorleistung für H13 Filter anpassen


Sie können den F9 Filter des Geräts durch einen H13 Filter ersetzen. Für diesen Fall muss die Ventilatorleistung angepasst werden. Setzen Sie sich dazu mit OP-Air in Verbindung. Es steht für diesen Vorgang eine separate Einstellanweisung zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich der Schalldruckpegel nach der Anpassung um 5 - 6 dB(A) erhöhen wird.

## Einstell-Parameter der Siemens-Steuerung ändern

- ① Wie Sie die Einstellung der Parameter P01 - P15 ändern können, ist in der Bedienungsanleitung für die Siemens-Fernbedienung beschrieben.

Verändern Sie die Einstell-Parameter 30ff der Siemens-Steuerung (siehe Seite 70f) nur nach Rücksprache mit OP-AIR GmbH. Der Betrieb des Gerätes mit falschen Einstell-Parametern kann zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

<b>ACHTUNG!</b>	
	<p>Zu gering eingestellte Luftmengen können zu Eisbildung am Register führen. Zu hoch eingestellte Luftmengen können zum ungewollten Transport von Wasser in Form von Wassertropfen führen.</p> <p>▶ Ändern Sie die Luftmengen nur nach Rücksprache mit OP-AIR GmbH.</p>

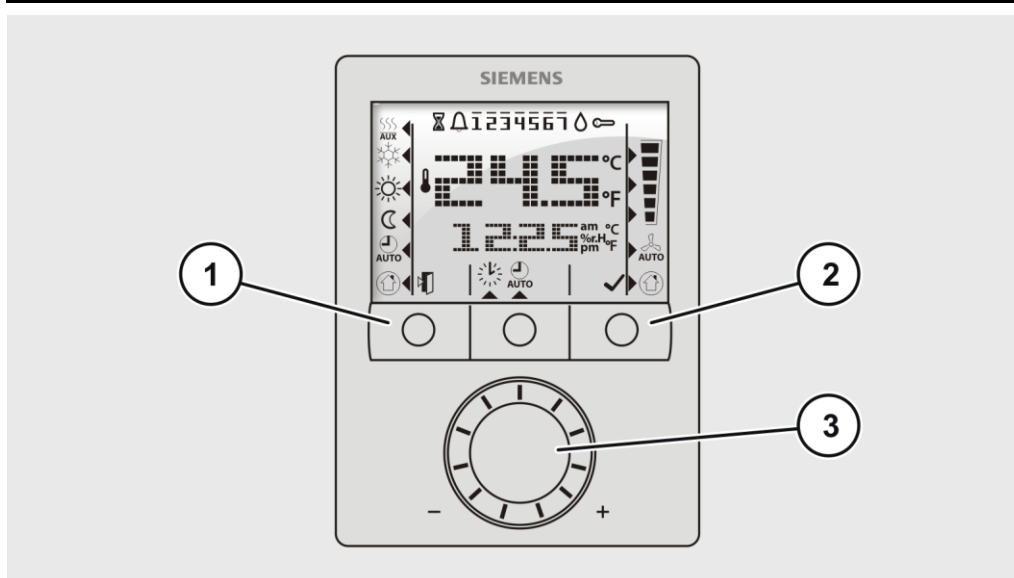

Um die Einstell-Parameter 30ff der Siemens-Steuerung mithilfe der Kabel-Fernbedienung anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Drücken Sie die Tasten (1) und (2) gleichzeitig für 3 Sekunden.
- ▶ Drücken Sie nach dem Loslassen der Tasten innerhalb von 2 Sekunden die Taste (1) für 3 Sekunden.
- ▶ Drehen Sie den Drehknopf (3) mindestens eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.

Sie haben den Parameter-Einstellmodus erreicht. Die Parameter können nun durch weiteres Drehen des Drehknopfes ausgewählt werden.

- ▶ Wählen Sie den zu ändernden Parameter aus (siehe Seite 70f).
- ▶ Drücken Sie die Taste (2).

Der aktuelle Wert des gewählten Parameters beginnt zu blinken; er kann durch Drehen des Drehknopfes geändert werden. Die werkseitig voreingestellten Parameter-Werte können Sie der Tabelle auf Seite 70f entnehmen.

- ▶ Um den geänderten Wert zu bestätigen, drücken Sie die Taste (2). Um die Änderung rückgängig zu machen, drücken Sie die Taste (1).
- ▶ Falls weitere Parameter geändert werden sollen, wiederholen Sie die letzten drei Schritte, oder drücken Sie die Taste (1), um den Parameter-Einstellmodus zu verlassen.

## Gerät reinigen

Folgende Hilfsmittel sind für das Reinigen des Geräts erforderlich:


- Leiter
- sauerstoffspaltendes Desinfektionsmittel, wir empfehlen das Produkt Schülke Perform in einprozentiger Konzentration (Einwirkzeit 30 Minuten)
- alkoholisches Desinfektionsmittel, wir empfehlen das Produkt Diversy Divodes FG VT29

Um das Gerät zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Schalten Sie das Gerät spannungsfrei.
- ▶ Entfernen Sie die beiden Seitengehäuse, siehe Seite 48.
- ▶ Entfernen Sie die beiden Filtergehäuse, siehe Seite 49.
- ▶ Entfernen Sie den Filter F7, siehe Seite 52.
- ▶ Entfernen Sie den Filter F9, siehe Seite 54.
- ▶ Beachten und befolgen Sie die Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt für das sauerstoffspaltende Desinfektionsmittel.
- ▶ Desinfizieren Sie die Geräteteile von innen und außen mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel.
- ▶ Entfernen Sie die Gummimembran aus dem Tauwasser-Auslass (3).
- ▶ Sprühen Sie den Wärmetauscher an der Luftaustrittsseite mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel ein, bis dieses als wässrige Lösung auf beiden Seiten in die Tauwasserwanne läuft.

Das überschüssige Desinfektionsmittel läuft ab.

- ▶ Spülen Sie nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser nach.
- ▶ Ziehen Sie den Sensorstecker aus der Buchse (1) an der Kondensatpumpe.
- ▶ Ziehen Sie den Schlauch (2) aus dem unteren Anschluss der Kondensatpumpe.

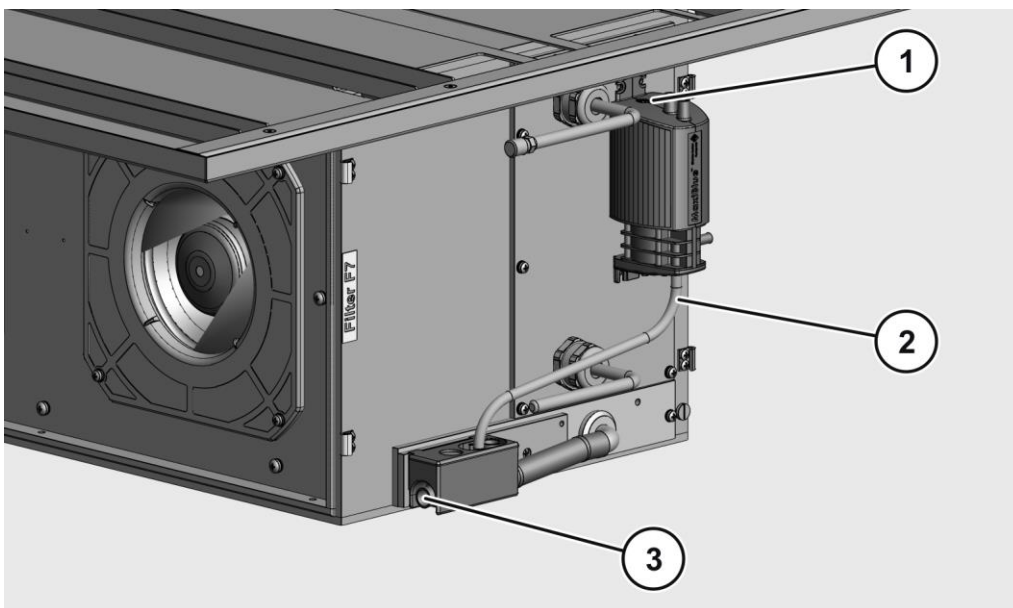

- ▶ Lösen und entfernen Sie die Schrauben (2), mit denen die Tauwasserwanne am Gerät befestigt ist.
- ▶ Ziehen Sie die Tauwasserwanne (1) aus dem Gerät.

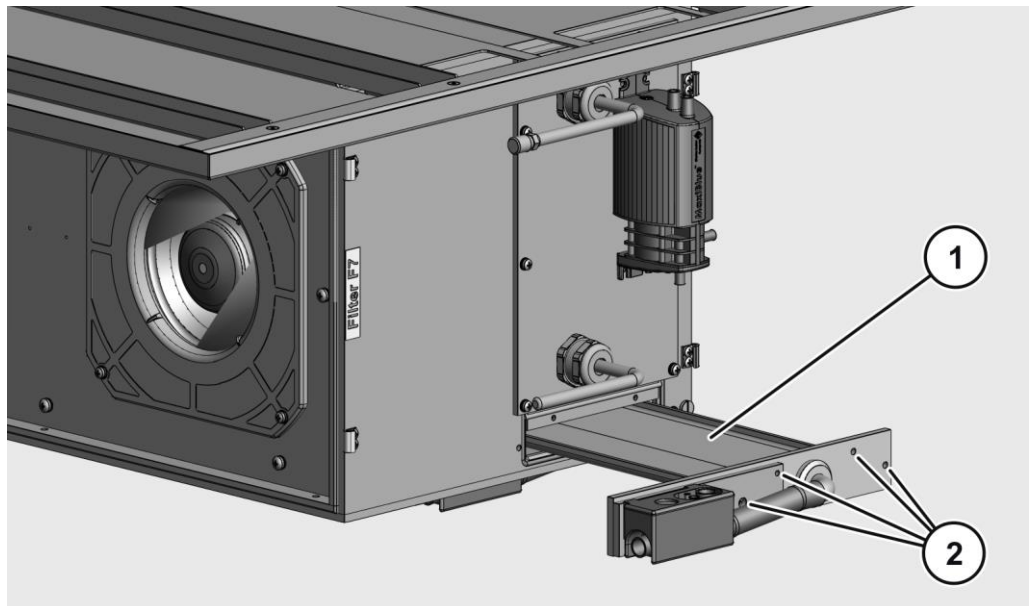

- ▶ Desinfizieren Sie die Tauwasserwanne.
- ▶ Desinfizieren Sie den Gehäusebereich unterhalb der Tauwasserwanne mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel.
- ▶ Setzen Sie die desinfizierte Tauwasserwanne ein.
- ▶ Befestigen Sie die Tauwasserwanne mit den vier Schrauben am Gerät.
- ▶ Verbinden Sie den Schlauch mit dem unteren Anschluss der Kondensatpumpe.
- ▶ Stecken Sie den Sensorstecker in die Buchse an der Kondensatpumpe.
- ▶ Setzen Sie die Gummimembran in den Tauwasser-Auslass.
- ▶ Desinfizieren Sie die Montageecken mit sauerstoffspaltendem Desinfektionsmittel.
- ▶ Benetzen Sie das Filtergehäuse F7 mit alkoholischem Desinfektionsmittel.
- ▶ Benetzen Sie das Filtergehäuse F9 mit alkoholischem Desinfektionsmittel.
- ▶ Setzen Sie den Filter F7 in das Filtergehäuse F7 ein, siehe Seite 52.
- ▶ Setzen Sie den Filter F9 in das Filtergehäuse F9 ein, siehe Seite 54.
- ▶ Benetzen Sie das Mittelmodul allseitig mit alkoholischem Desinfektionsmittel.
- ▶ Warten Sie bis sich die Desinfektionsmittel verflüchtigt haben.
- ▶ Montieren Sie die Filtergehäuse am Gerät, siehe Seite 49.
- ▶ Montieren Sie die beiden Seitengehäuse, siehe Seite 48.
- ▶ Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie die Funktion.

## Gerät warten

- ▶ Protokollieren Sie die ausgeführten Wartungsarbeiten detailliert im Betriebsbuch des Geräts.

### Wartungsplan

Intervall	Komponente	Handlung
alle 3 Monate	Gerät außen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie eine Sichtkontrolle auf äußere Verschmutzung durch.</li> <li>▶ Entfernen Sie äußere Verschmutzungen, siehe Seite 44.</li> </ul>
alle 3 bis 6 Monate	Gerät außen und innen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie eine mikrobiologische Oberflächenuntersuchung durch, siehe Seite 56.</li> </ul>
alle 6 Monate	Gerät außen und innen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Führen Sie eine Sichtkontrolle auf äußere Verschmutzung durch.</li> <li>▶ Entfernen Sie äußere Verschmutzungen, siehe Seite 44.</li> <li>▶ Führen Sie eine Sichtkontrolle auf innere Verschmutzung durch.</li> <li>▶ Entfernen Sie innere Verschmutzungen, siehe Seite 44.</li> </ul>
jährlich	Kältemittelkreislauf	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie den Kältemittelkreislauf auf Leckagen.</li> <li>▶ Dichten Sie Leckagen fachgerecht ab.</li> </ul>
jährlich	elektrische Ausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die elektrische Ausrüstung des Geräts.</li> </ul>
jährlich	Luftauslass	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bestimmen Sie die Luftkeimzahl, siehe Seite 56.</li> <li>▶ Dokumentieren Sie die ermittelte Luftkeimzahl.</li> </ul>
jährlich (mindestens)	Filter erste Stufe (F7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tauschen Sie den Filter der ersten Stufe (F7) gegen einen neuen vom gleichen Typ aus, siehe Seite 52.</li> </ul>
alle 2 Jahre (mindestens)	Filter zweite Stufe (F9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tauschen Sie den Filter der zweiten Stufe (F9) gegen einen neuen vom gleichen Typ aus, siehe Seite 54.</li> </ul>


### Wartungsarbeiten vorbereiten

- ▶ Informieren Sie die zuständige Person über die Durchführung der Wartungsarbeiten.
- ▶ Sperren Sie den Arbeitsbereich für unbefugte Personen ab.
- ▶ Schalten Sie das Gerät ab.
- ▶ Lassen Sie das Gerät ggf. handwarm abkühlen.
- ▶ Legen Sie die notwendigen Hilfsmittel bereit.
- ▶ Tragen Sie die für die Arbeiten notwendige persönliche Schutzausrüstung.

### Gerät für Wartungsarbeiten vorbereiten

Um das Gerät (2) für die Wartungsarbeiten vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Entfernen Sie die beiden Seitengehäuse (1, 4), siehe Seite 48.
- ▶ Entfernen Sie die Filtergehäuse F9 (5) und F7 (3), siehe Seite 49.

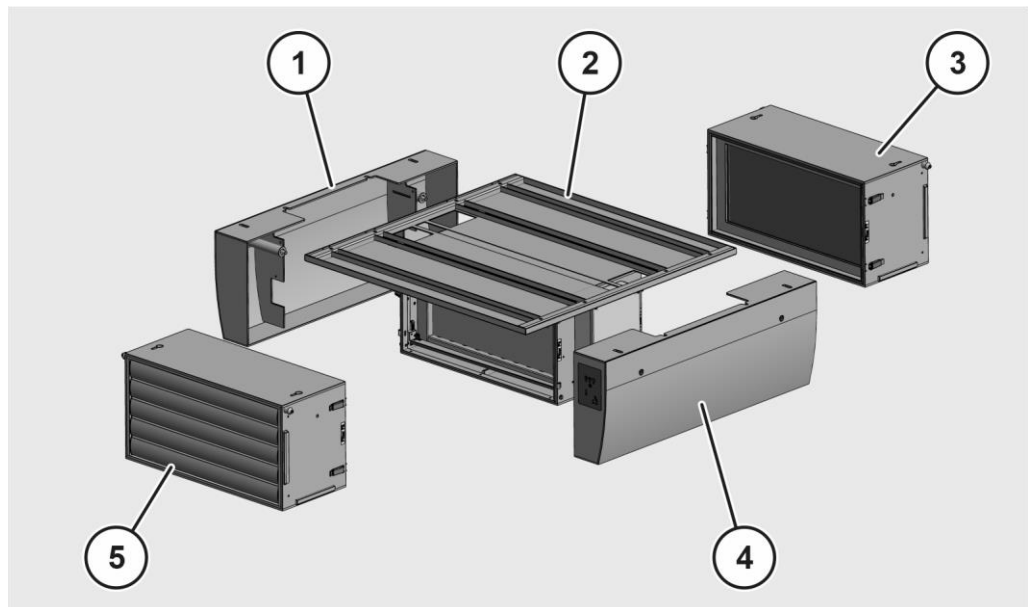

## Seitengehäuse demontieren und montieren

**i** Das Demontieren des rechten und linken Seitengehäuses ist identisch.

### **⚠️ WARNUNG**



Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.


- ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.

Die Seitengehäuse (1, 3) sind jeweils an zwei Stellen des Geräts befestigt. Um ein Seitengehäuse zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel SW 6 in die Öffnung (4) der Verriegelung und drehen Sie diesen bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öffnung.
- ▶ Ziehen Sie das Seitengehäuse vom Gerät (2) ab.

Das Seitengehäuse ist mit einem Sicherungsseil gegen Herabfallen an der Schraube (5) gesichert.

- ▶ Um das Seitengehäuse abnehmen zu können, lösen Sie den vorhandenen Karabinerhaken.

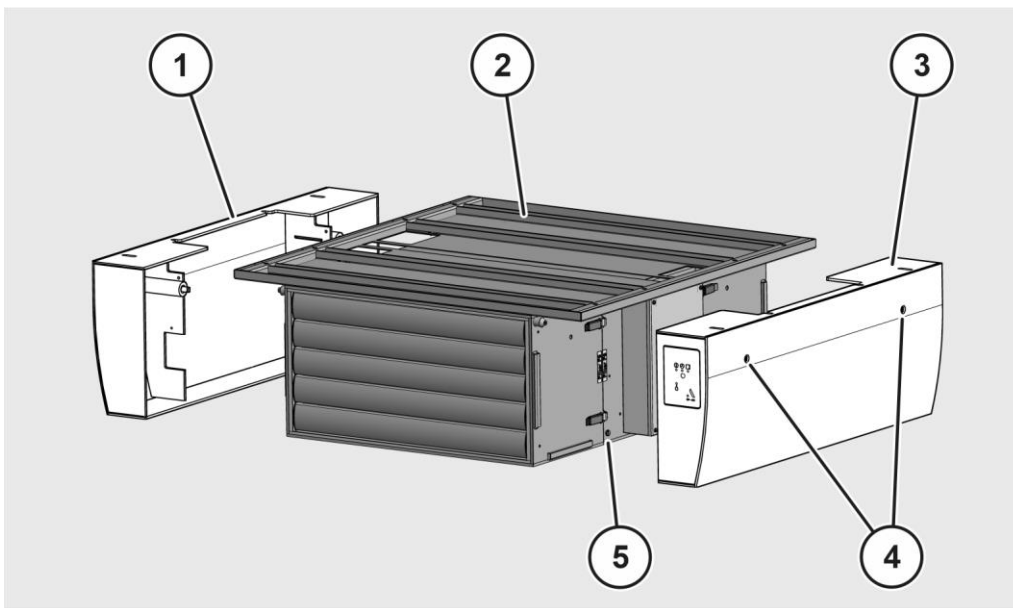

Um das Seitengehäuse zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Um das Seitengehäuse gegen Herabfallen zu sichern, befestigen Sie das Sicherungsseil mit dem Karabinerhaken am Seitengehäuse.
- ▶ Setzen Sie das Seitengehäuse ein.
- ▶ Stecken Sie einen Innensechskantschlüssel SW 6 in die Öffnung (4) und drehen Sie die Verriegelung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn.
- ▶ Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öffnung.



## Filtergehäuse demontieren und montieren

**i** Das Demontieren der Filtergehäuse F7 und F9 ist identisch.


### **⚠️ WARNUNG**



Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.

- ▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.

Die Filtergehäuse sind auf der Oberseite mit zwei Schlüsselbohrungen (1) ausgestattet. Diese dienen bei der Montage als Positionierhilfe und schützen bei der Demontage vor unbeabsichtigtem Herunterfallen. Die zugehörigen Arretiervorrichtungen sind unterhalb der Montageplatte vorhanden.

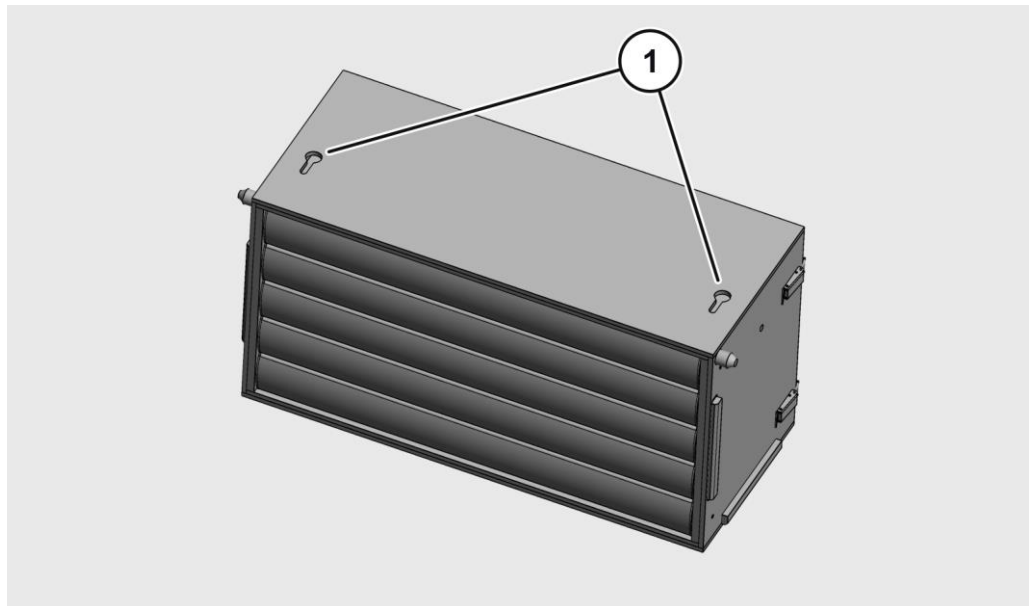


Das Filtergehäuse (1) ist an den Seiten mit jeweils zwei Bügelverschlüssen (3) befestigt. Die Abbildung zeigt das Filtergehäuse F7.

- ▶ Öffnen Sie die Bügelverschlüsse.
- ▶ Ziehen Sie das Filtergehäuse etwa 40 mm vom Gerät (2) ab.

Das Filtergehäuse wird hierbei in den Schlüsselbohrungen gehalten.

- ▶ Bewegen Sie das Filtergehäuse nun nach unten. Hier müssen Sie ggf. durch vor- und zurückbewegen des Filtergehäuses die entsprechende Position finden.

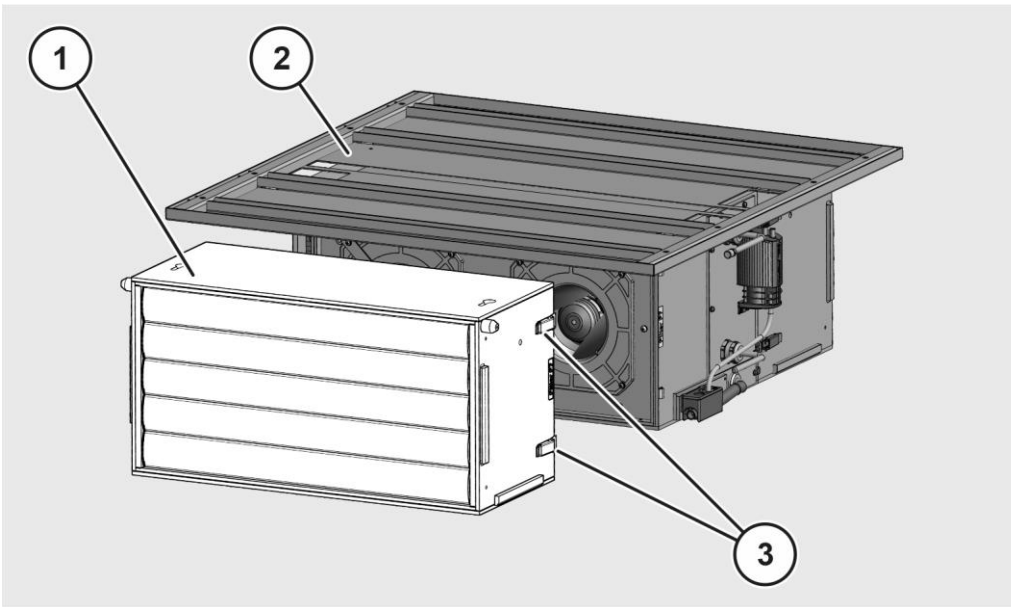

Um das Filtergehäuse zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Heben Sie das Filtergehäuse an.
- ▶ Fädeln Sie die beiden Schlüsselbohrungen in die vorhandenen Arretierhilfen unterhalb der Montageplatte ein.
- ▶ Schieben Sie das Filtergehäuse bis zum Anschlag.
- ▶ Schließen Sie die Bügelverschlüsse (pro Seite zwei).

### Lamellenrahmen demontieren und montieren

Der Lamellenrahmen (1) ist mit vier Schrauben im Filtergehäuse (2) befestigt. Um den Lamellenrahmen zu demontieren, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Entfernen Sie die auf jeder Seite zwei Schrauben (3) (Schrauben nur an einer Seite dargestellt).
- ▶ Ziehen Sie den Lamellenrahmen ab.


Die Abbildung zeigt den Lamellenrahmen des Filtergehäuses F7. Die Vorgehensweise ist für das Filtergehäuse F9 identisch.

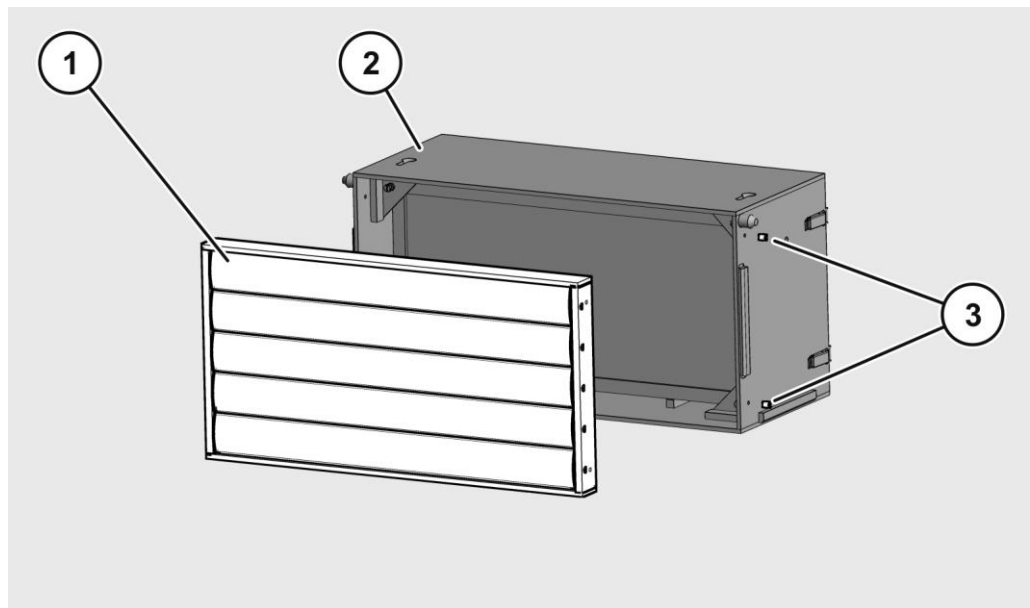

Um den Lamellenrahmen zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Stecken Sie den Lamellenrahmen auf.
- ▶ Befestigen Sie den Lamellenrahmen mit jeweils zwei Schrauben an jeder Seite.

## Filter der ersten Stufe (F7) wechseln


 Das Filtergehäuse F7 ist mit einem Aufkleber „F7“ gekennzeichnet.

Um den Filter der ersten Stufe (F7) zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Entfernen Sie den Lamellenrahmen, siehe Seite 51.
- ▶ Lösen Sie die Schrauben der vier Montageecken (2) mit einem Schlitzschraubendreher.
- ▶ Entfernen Sie die vier Montageecken aus dem Filtergehäuse (1).

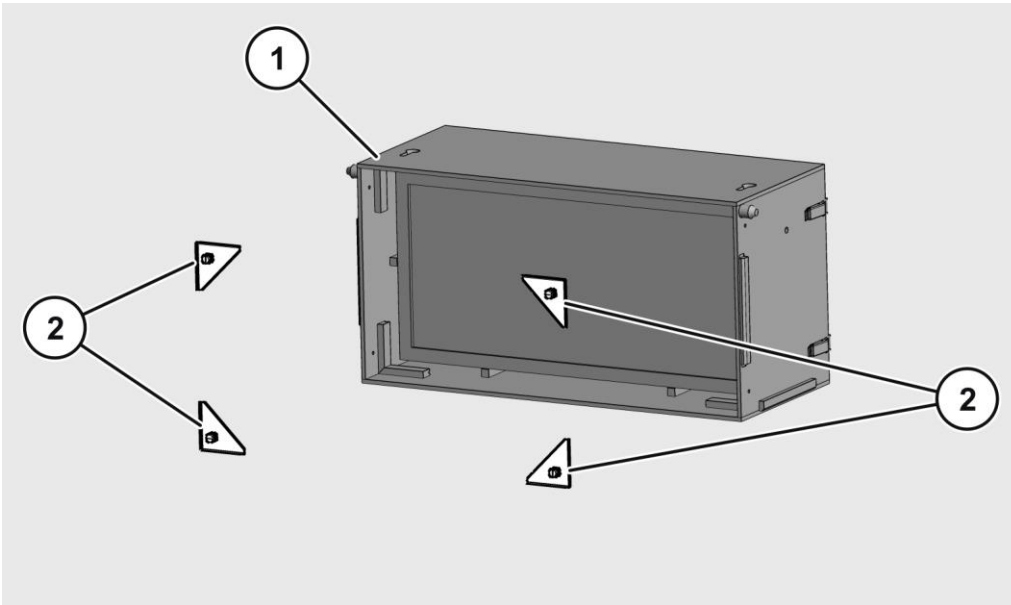

- ▶ Ziehen Sie den Filter (1) der ersten Stufe (F7) aus dem Filtergehäuse (2).

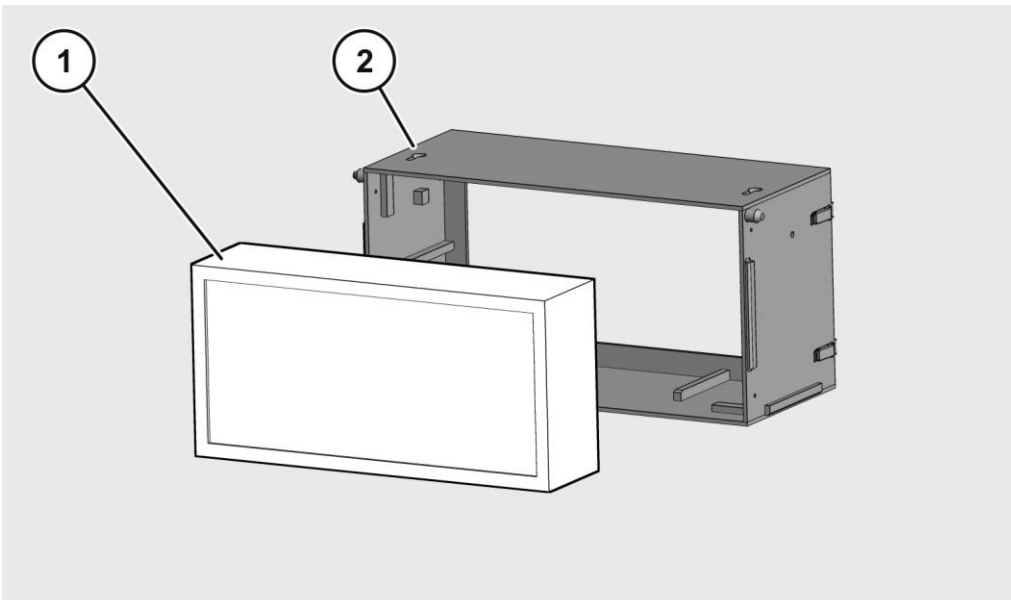


**ACHTUNG!**

Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.  
 ► Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.  
 ► Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.


- Reinigen Sie das Gerät, siehe Seite 44.
- Nehmen Sie den Filter F7 aus seiner Verpackung.
- Setzen Sie den neuen Filter (1) der ersten Stufe (F7) in das Filtergehäuse (2) ein.

Die umlaufende Dichtung (3) am Filter muss hierbei in Richtung Gehäuse weisen.

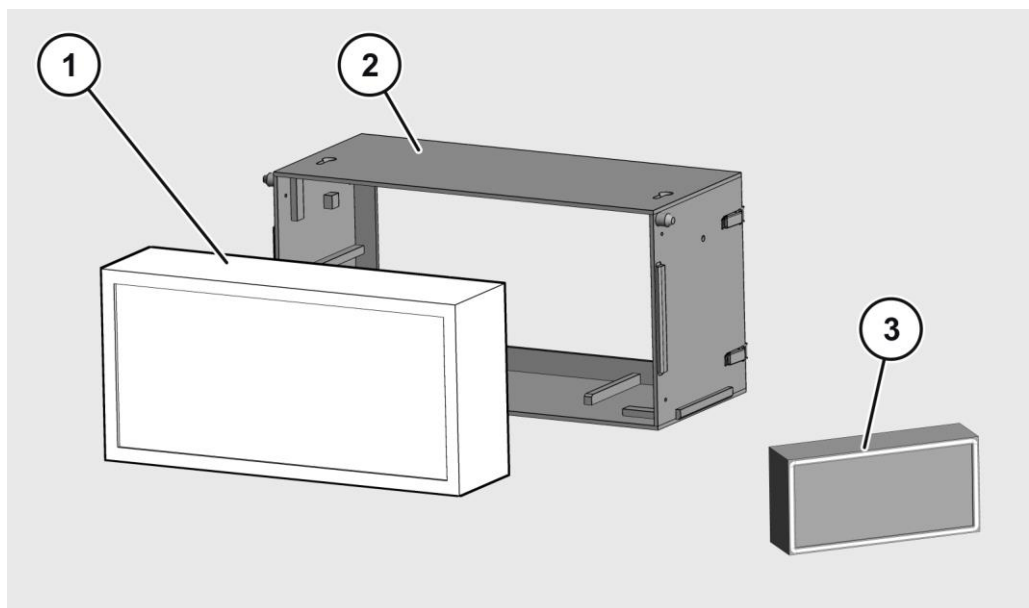


- Setzen Sie die vier Montageecken ein.
- Ziehen Sie die Schrauben der Montageecken mit einem Schlitzschraubendreher über Kreuz handfest an.
- Setzen Sie den Lamellenrahmen ein, siehe Seite 51.
- Montieren Sie das Filtergehäuse am Gerät, siehe Seite 49.

## Filter der zweiten Stufe (F9) wechseln


 Das Filtergehäuse F9 ist mit einem Aufkleber „F9“ gekennzeichnet.

Um den Filter der zweiten Stufe (F9) zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Entfernen Sie den Lamellenrahmen, siehe Seite 51.
- ▶ Lösen Sie die Schrauben der vier Montageecken (2) mit einem Schlitzschraubendreher.
- ▶ Entfernen Sie die vier Montageecken aus dem Filtergehäuse (1).

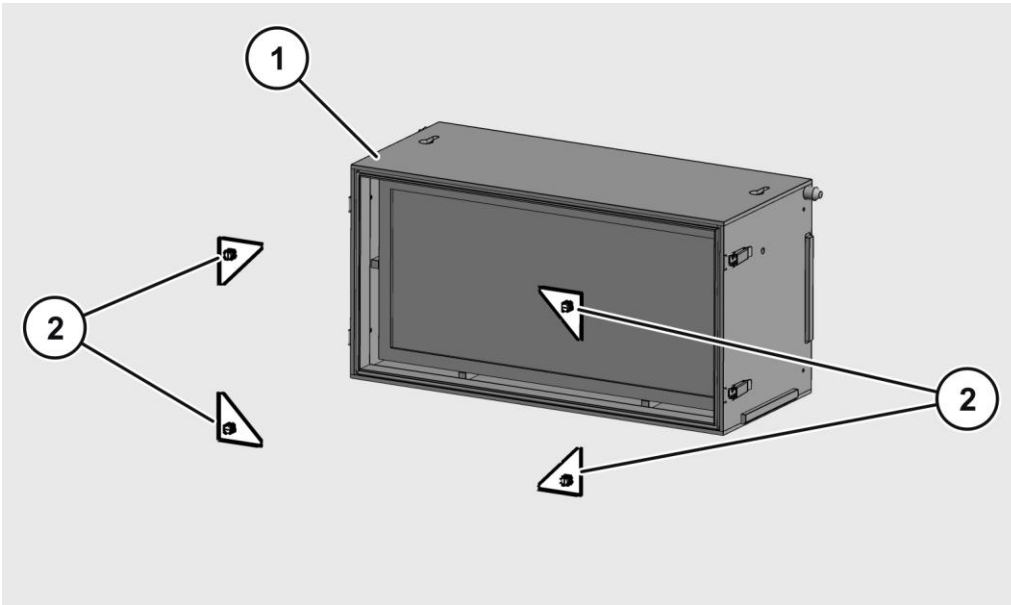

- ▶ Ziehen Sie den Filter (1) der zweiten Stufe (F9) aus dem Filtergehäuse (2).

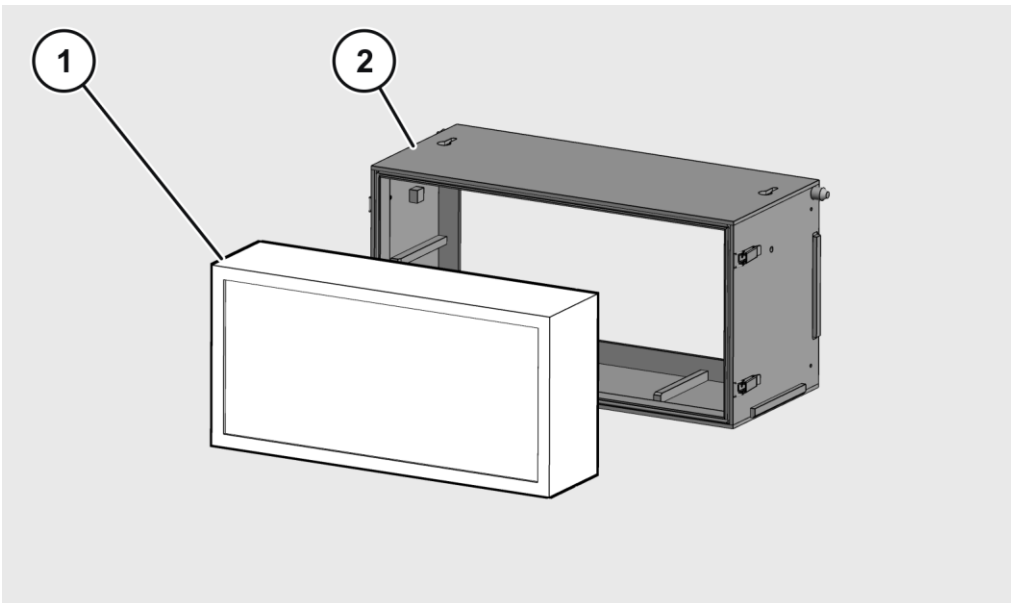


**ACHTUNG!**

Unzureichende Filterleistung durch beschädigten Filter.  
 ► Um Beschädigungen des Filters zu vermeiden, fassen Sie diesen nur an den Seiten an.  
 ► Stellen Sie sicher, dass das Filterelement mechanisch nicht beschädigt wird.

- Reinigen Sie das Gerät, siehe Seite 44.
- Nehmen Sie den Filter F9 aus seiner Verpackung.
- Setzen Sie den neuen Filter (1) der zweiten Stufe (F9) in das Filtergehäuse (2) ein.

Die umlaufende Dichtung (1) am Filter muss hierbei in Richtung Gehäuse weisen.

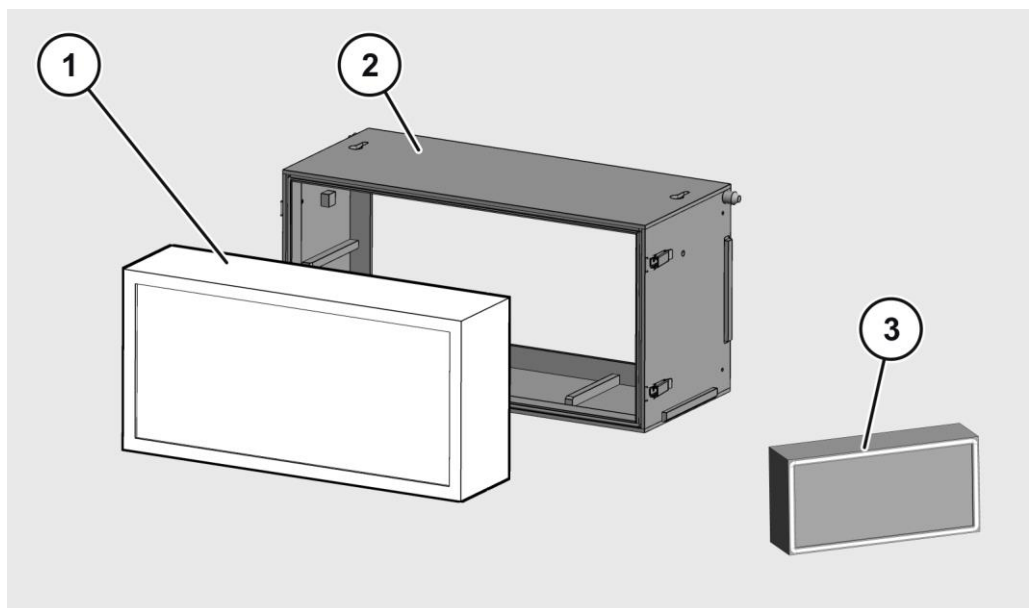

- Setzen Sie die vier Montageecken ein.
- Ziehen Sie die Schrauben der Montageecken mit einem Schlitzschraubendreher über Kreuz handfest an.
- Setzen Sie das Filtergehäuse ein.
- Befestigen Sie es mit den Befestigungslaschen auf beiden Seiten.
- Setzen Sie den Lamellenrahmen ein, siehe Seite 51.
- Montieren Sie das Filtergehäuse am Gerät, siehe Seite 49.

## Hygieneprüfung durchführen

Zum Nachweis über den einwandfreien hygienischen Zustand des Gerätes sind folgende Hygieneprüfungen durchzuführen:


- Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung
- Luftkeimzahlbestimmung

### Mikrobiologische Oberflächenuntersuchung

Sie benötigen für die mikrobiologische Oberflächenuntersuchung RODAC-Abklatschplatten (Replicate Organism Detection and Counting).

- ▶ Führen Sie eine mikrobiologische Oberflächenuntersuchung vor der Inbetriebnahme an folgenden Stellen durch:
  - luftführende Gehäuseteile
  - Wärmetauscher
  - Filtermedien (Innenseite des Geräts)
  - Tauwasserwanne.
- ▶ Nehmen Sie entsprechende Proben von den aufgeführten Stellen.
- ▶ Desinfizieren Sie die Flächen von denen Sie Proben genommen haben.
- ▶ Lassen Sie die Bestimmung der koloniebildende Einheiten (KBE) durch ein akkreditiertes Labor ausführen.

Das Ergebnis einer KBE – Bestimmung „in Operation“ dient dem mikrobiologischen Monitoring und kann zur Festlegung künftiger Prüfintervalle herangezogen werden.

 Weitere Informationen entnehmen Sie dem Betriebsbuch.

### Luftkeimzahl bestimmen

Das Bestimmen der Luftkeimzahl sollte im Zuge der Raumqualifizierung in einem mit dem Hygieniker abzustimmenden, periodischen Intervall durchgeführt werden. Dies dient zur Qualifizierung der Vergleichsluft des Raumes und zur Beurteilung der Luft, welche das Gerät verlässt.

Bestimmen Sie die Luftkeimzahl in folgenden Fällen:




- bei der hygienischen Erstuntersuchung
- bei einem konkreten Verdacht überhöhter Koloniezahlen

Als Richtwerte zur Beurteilung der Untersuchungsergebnisse gelten die Angaben der VDI 6022, Tabelle 9.

 Weitere Informationen entnehmen Sie dem Betriebsbuch.



## Gerät außer Betrieb nehmen

<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Schwere oder tödliche Verletzungen durch Kontakt mit spannungsführenden Teilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur durch Elektro-Fachpersonal durchführen.</li> <li>▶ Schalten Sie das Gerät vor Beginn von Arbeiten spannungsfrei.</li> <li>▶ Prüfen Sie vor Beginn von Arbeiten an elektrischen Komponenten diese auf elektrische Spannung und mögliche Restladungen.</li> <li>▶ Führen Sie Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur unter Aufsicht einer zweiten Person durch.</li> </ul>
<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch den Kontakt mit Kältemittel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lassen Sie das Gerät nur durch Fachpersonal eines Fachbetriebs für Klimatechnik montieren und warten.</li> <li>▶ Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten, bei denen Sie in Kontakt mit Kältemittel kommen könnten.</li> <li>▶ Tragen Sie eine chemikalienbeständige Schutzbrille.</li> </ul>
<b>⚠️ WARNUNG</b>	
	<p>Verletzungsgefahr durch das Stürzen von einer Leiter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie für Arbeiten an der Decke eine standsichere Leiter.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.</li> </ul>

Um das Gerät außer Betrieb zu nehmen um es anschließend zu entsorgen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Tragen Sie die für die Arbeiten notwendige persönliche Schutzausrüstung.
- ▶ Demontieren Sie die Seitengehäuse.
- ▶ Demontieren Sie die Filtergehäuse.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von den Medienanschlüssen.
- ▶ Demontieren Sie das Gerät von der Decke.

## Gerät entsorgen

Entsorgen Sie das Gerät und dessen Betriebsstoffe über einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb. Beachten und befolgen Sie die dafür geltenden länderspezifischen Vorschriften. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung in Verbindung.

Das Gerät besteht hauptsächlich aus folgenden Werkstoffen.

Bauteil	Werkstoff
Montageplatte	Aluminium, Edelstahl
Filtergehäuse	PVC
Mittelmodul	PVC
Lamellen	Aluminium
Lamellenrahmen	PVC
Filter	Kunstfaser
Elektrische Komponenten	Kupfer, Kunststoffe

- ▶ Sortieren Sie die demontierten Teile nach ihren Werkstoffen.
- ▶ Führen Sie die Teile der Wiederverwertung zu.
- ▶ Entsorgen Sie die Betriebsstoffe nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen.

## Technische Daten

### Hepa Jet Smart W-Version

	20	25	35	40	50
Kälteleistung [kW]	2,2	2,8	3,6 (3,3*)	4 (3,5*)	5 (3,8*)
Heizleistung [kW]	–				
Maximale Druckstufe (PS) des Wärmetauschers [bar]	11				
Luftmenge niedrig [m <sup>3</sup> /h]	250	250	360	360	360
Luftmenge hoch** [m <sup>3</sup> /h]	480	480	600	660	780
B x H x T [mm]	900 x 340 x 900				
Gewicht [kg]	82				
Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz				
Leistungsaufnahme [W]	340				
empfohlene Absicherung [A]	16				
Förderhöhe Kondensatpumpe [mm]	500				
Vorlauf [°C]	6				
Rücklauf [°C]	12				
Wassermenge [l/h]	368	468	541	575	780
Druckabfall [kPa]	15	16	19,2	21,4	36,1
Anschluss Wärmetauscher VL/RL	1/2" AG				
Schalldruckpegel LpA [dB(A)] gemessen in 1 m Abstand	40–46	40–46	42–51	42–53	42–55
niedrige Lüfterstufe LpA [dB(A)]	40	40	42	42	42
hohe Lüfterstufe LpA [dB(A)]	46	46	51	53	55

\*): Leistungsangaben bei Verwendung von 34% Glykosol N als Frostschutzmittel im Wasserkreislauf


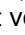


\*\*): Wo ein höherer Schalldruckpegel in Kauf genommen werden kann, ist eine Luftmenge (Luftvolumenstrom) von bis zu 1300 m<sup>3</sup>/h möglich.

## Filterdaten

	F7	F9	H13*
Norm	ISO ePM1 65% (F7)	ISO ePM1 80% (F9)	ISO 29463 Hepa Filterklasse H13
Filter Typ	Makro	Makro	Mikro SF
B x H x T [mm]	592 x 287 x 150		
Anfangsdruckdifferenz [Pa]	53	63	240
Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa]	160	190	390

\*) : Kann alternativ zu dem F9 Filter eingesetzt werden. Siehe auch Seite 41.

## Störungen beheben


Merkmal	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nach kurzer Zeit automatisch aus	Die Sicherung oder der Fehlerstrom-Schutzschalter lösen aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>▶ Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen.</li> </ul>
Wasser tritt aus dem Gerät aus	Die Kondensatpumpe ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>▶ Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen.</li> </ul>
Auf dem Display der Fernbedienung wird  und der Fehlercode "FILT" angezeigt.	Das Intervall für die Filterreinigung ist abgelaufen (siehe Parameter P62 auf Seite 70f). Der Betrieb des Geräts wird fortgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie anhand des Wartungsplans auf Seite 46, ob ein Filter-Austausch notwendig ist.</li> <li>▶ Wechseln Sie bei Bedarf Filter F7 und/oder F9.</li> <li>▶ Setzen Sie die Intervall-Funktion zurück, in dem Sie die Betriebsart von  auf  und wieder zurück schalten.</li> </ul>
Auf dem Display der Fernbedienung wird  und der Fehlercode "COND" angezeigt.	Die Kondensatpumpe hat eine Störung. Der Betrieb des Geräts wird gestoppt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>▶ Lassen Sie die Kondensatpumpe durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen.</li> </ul> <p>Wenn die Störung beseitigt ist, erlischt der Fehlercode, und das Gerät nimmt den Kühlbetrieb wieder auf.</p>
Auf dem Display der Fernbedienung wird ein anderer Fehlercode angezeigt	Es liegt Störung im Gerät vor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wenden Sie sich an den Service.</li> <li>▶ Teilen Sie den Fehlercode mit.</li> </ul>

Merkmal	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht	Es liegt ein Stromausfall vor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Stromversorgung sicher.</li> </ul> <p>Wenn die Stromversorgung hergestellt ist, nimmt das Gerät den Betrieb automatisch wieder auf.</p>
	Die Sicherung oder der Fehlerstrom-Schutzschalter wurde ausgelöst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob eine Sicherung ausgelöst wurde.</li> <li>▶ Schalten Sie die Sicherung wieder ein.</li> <li>▶ Prüfen Sie ob der Fehlerstrom-Schutzschalter ausgelöst wurde.</li> <li>▶ Schalten Sie den Fehlerstrom-Schutzschalter wieder ein.</li> <li>▶ Wenn diese Störung öfter auftritt, lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Service-Techniker prüfen.</li> </ul>


Merkmal	Mögliche Ursache	Abhilfe
Die Kühl- oder Heizleistung ist nicht ausreichend	Lufteinlass oder Luftauslass sind blockiert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie ob der Lufteinlass oder Luftauslass blockiert ist.</li> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei von Objekten sind.</li> </ul> <p>Angaben zu den Abständen von Objekten von Lufteinlass und Luftauslass finden Sie ab Seite 22.</p>
	Einer oder beide Luftfilter im Gerät sind stark verschmutzt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Luftfilter auf Verschmutzungen.</li> <li>▶ Tauschen Sie verschmutzte Luftfilter gegen einwandfreie Neue aus, siehe ab Seite 46.</li> </ul>
	Temperatur zu hoch oder zu niedrig eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen sie die Temperatureinstellung an der Fernbedienung.</li> <li>▶ Stellen Sie die Temperatur neu ein.</li> </ul>
	Ventilator Drehzahl zu hoch oder zu niedrig eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen sie die Einstellung der Ventilator Drehzahl an der Fernbedienung.</li> <li>▶ Stellen Sie eine geeignete Ventilator Drehzahl ein.</li> </ul>
	Fenster und/oder Türen sind geöffnet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie Türen und Fenster.</li> </ul>
	Direkte Sonneneinstrahlung in den Raum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung durch das Installieren von Jalousien oder Rollos.</li> </ul>
	Die Einstellung der Lamellen ist nicht korrekt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Einstellung der Lamellen.</li> <li>▶ Stellen Sie die Lamellen neu ein, siehe ab Seite 40.</li> </ul>
	Es sind zu viele Personen im Raum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebes nicht zu viele Personen im Raum aufhalten.</li> </ul> <p>Die mögliche Personenzahl hängt von der Raumgröße ab.</p>

# Anhang


## Schaltpläne (Betrieb mit Siemens Steuerung)

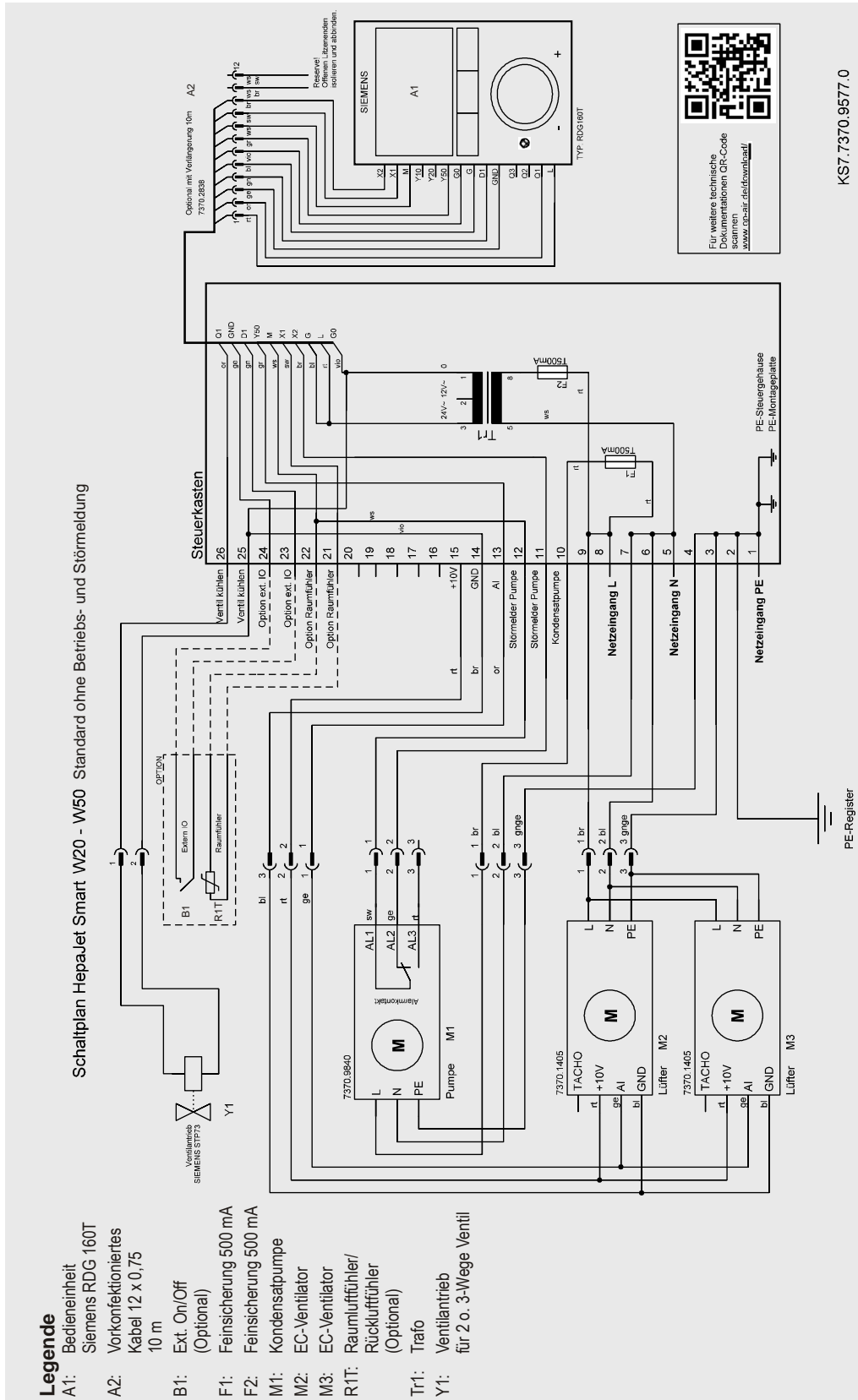



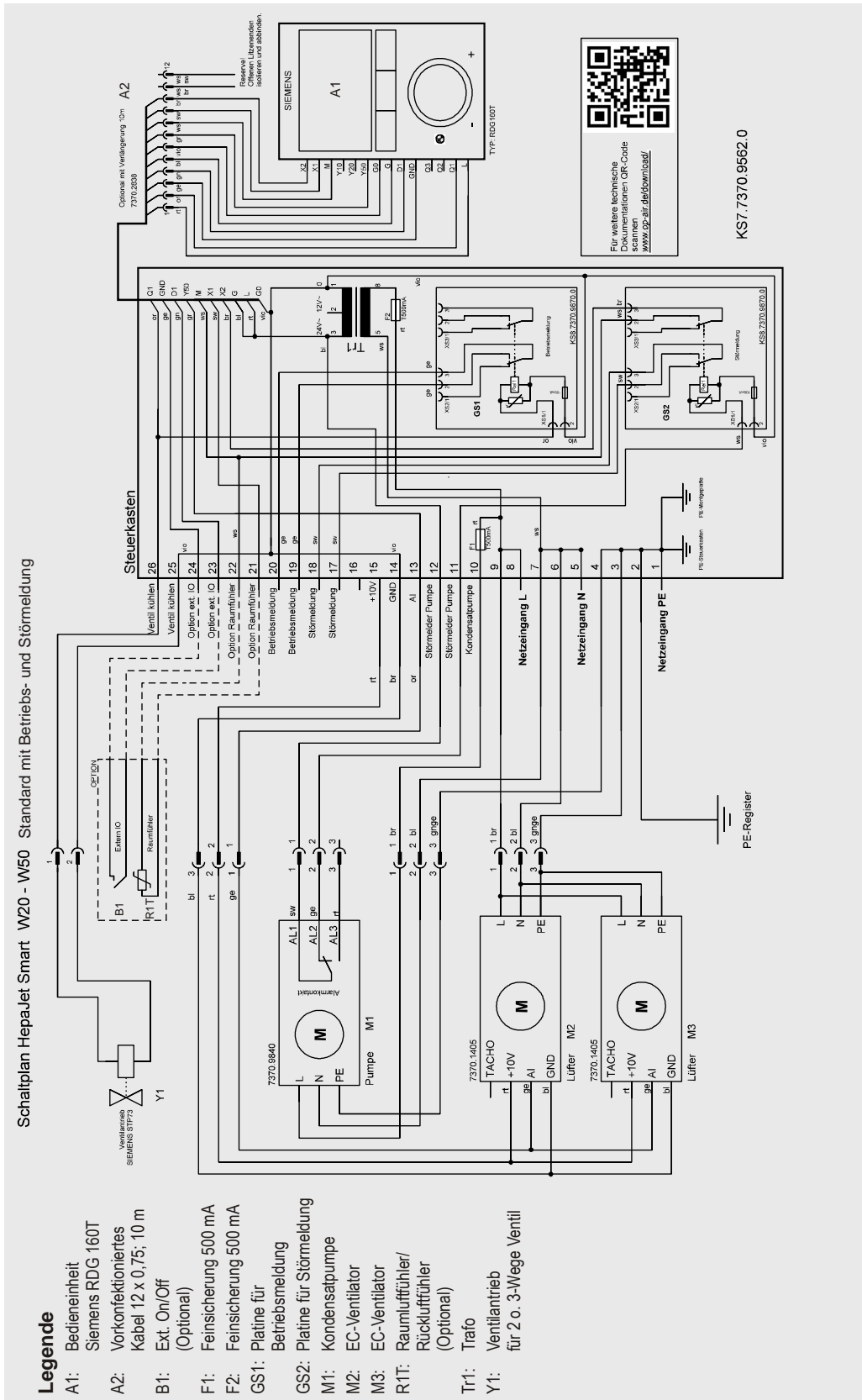


KS7.7370.9562.0

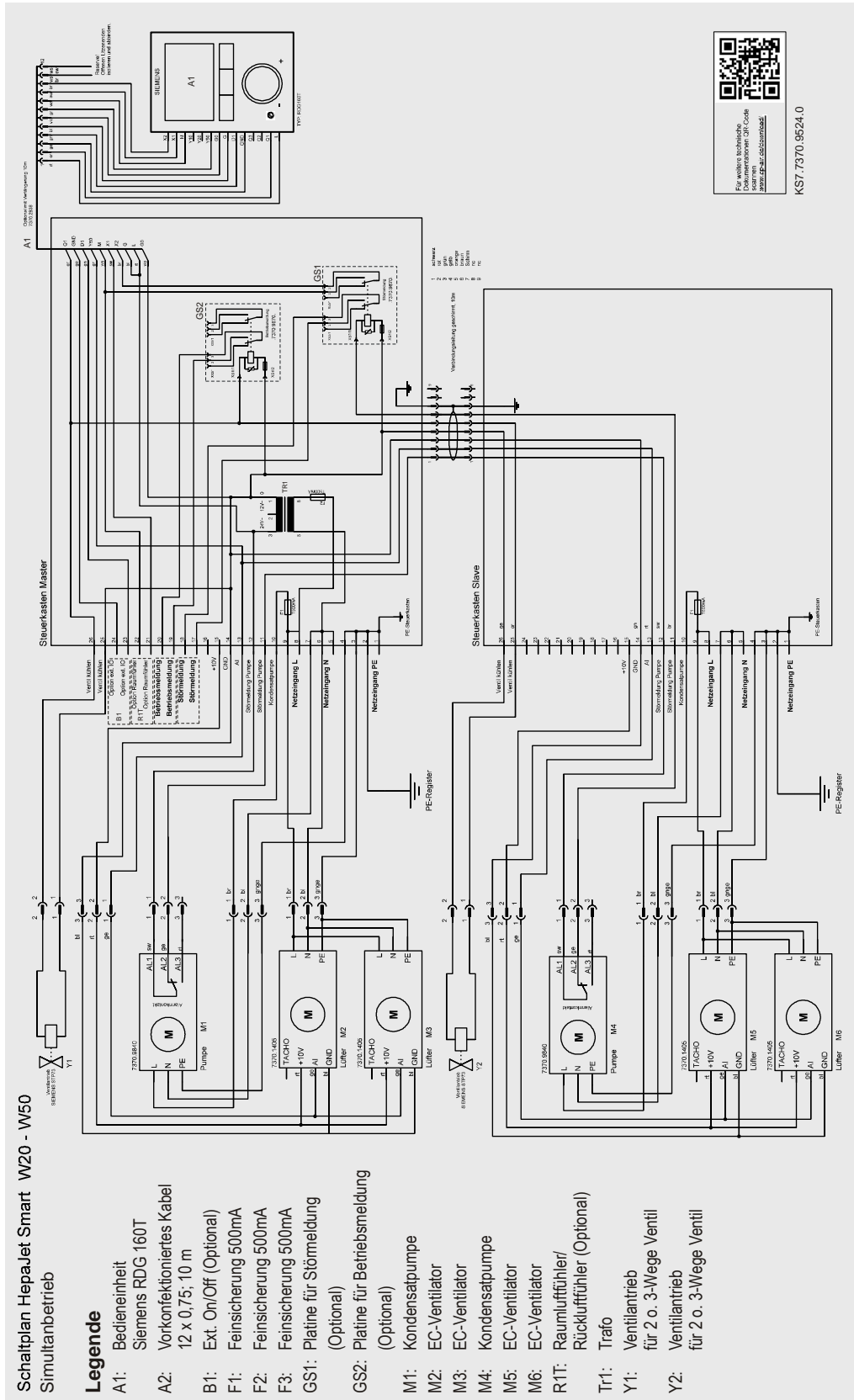


Für weitere technische Informationen auf Code scannen  
<https://www.op-air.com/produkte/ks7-7370-9524-0>  
 KS7.7370.9524.0

# Schaltpläne (GLT-Betrieb)

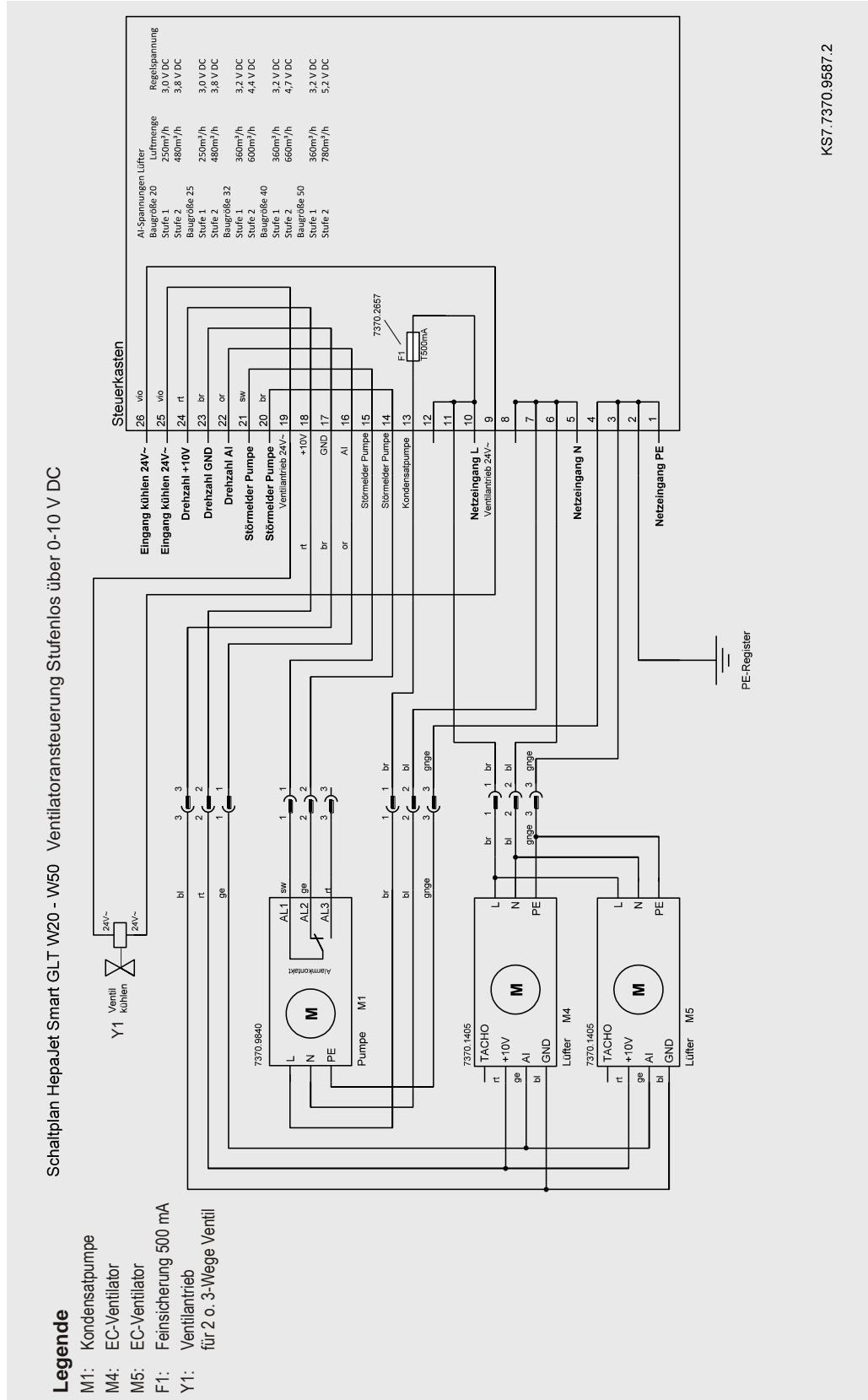

Schaltplan HepaJet Smart GLT W20 - W50 Ventilatoransteuerung 3-stufig über Relaiskontakt 24 V DC GS-GLT, 24V

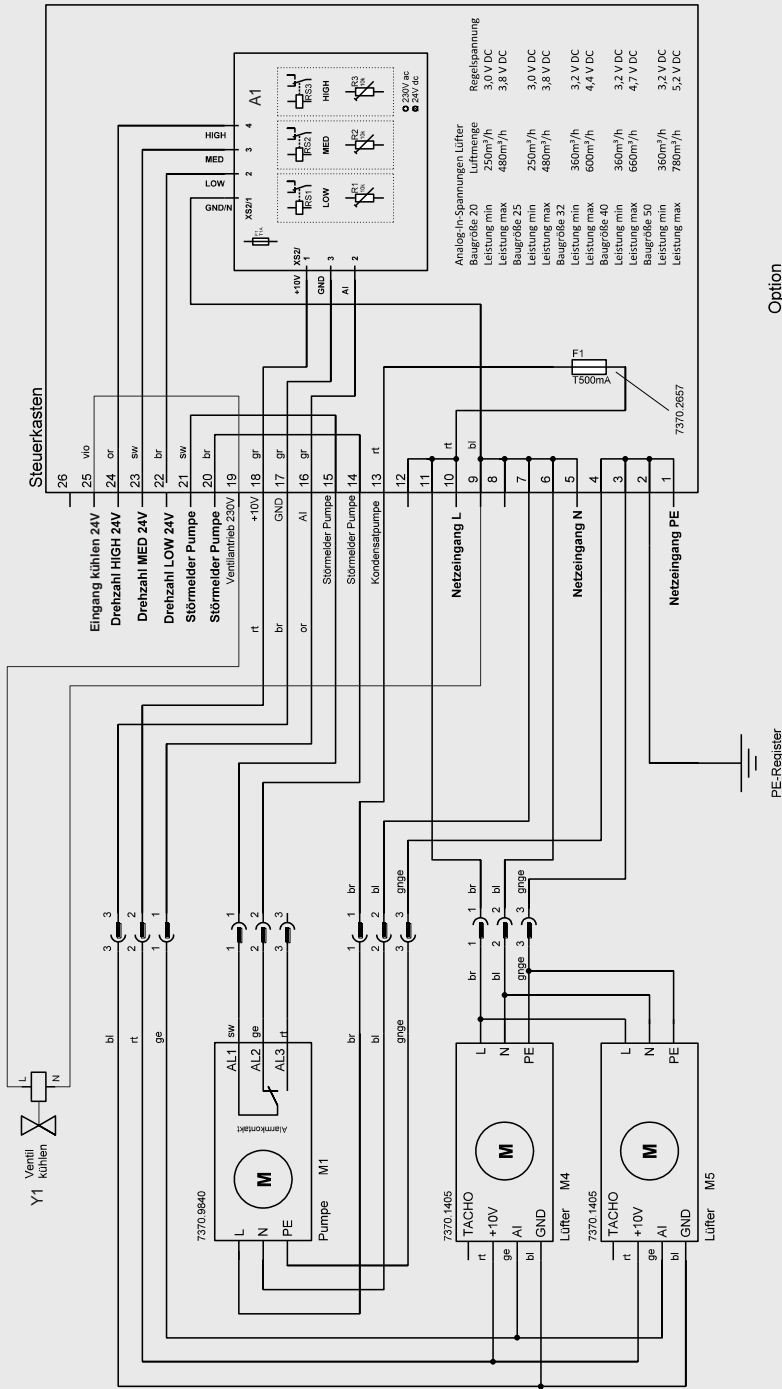


KS7.7370.9567.0

Option

**Legende**

- A1: Relaisplatine Ventilatorstufen 24V DC
- M1: Kondensatpumpe
- M4: EC-Ventilator
- M5: EC-Ventilator
- F1: Feinsicherung 500 mA
- Y1: Ventilatortrieb für 2 o. 3-Wege Ventil

Schaltplan HepaJet Smart GLT W20 - W50 Ventilatoransteuerung 3-stufig über Relaiskontakt 230 V AC  
GS-GLT, 230V

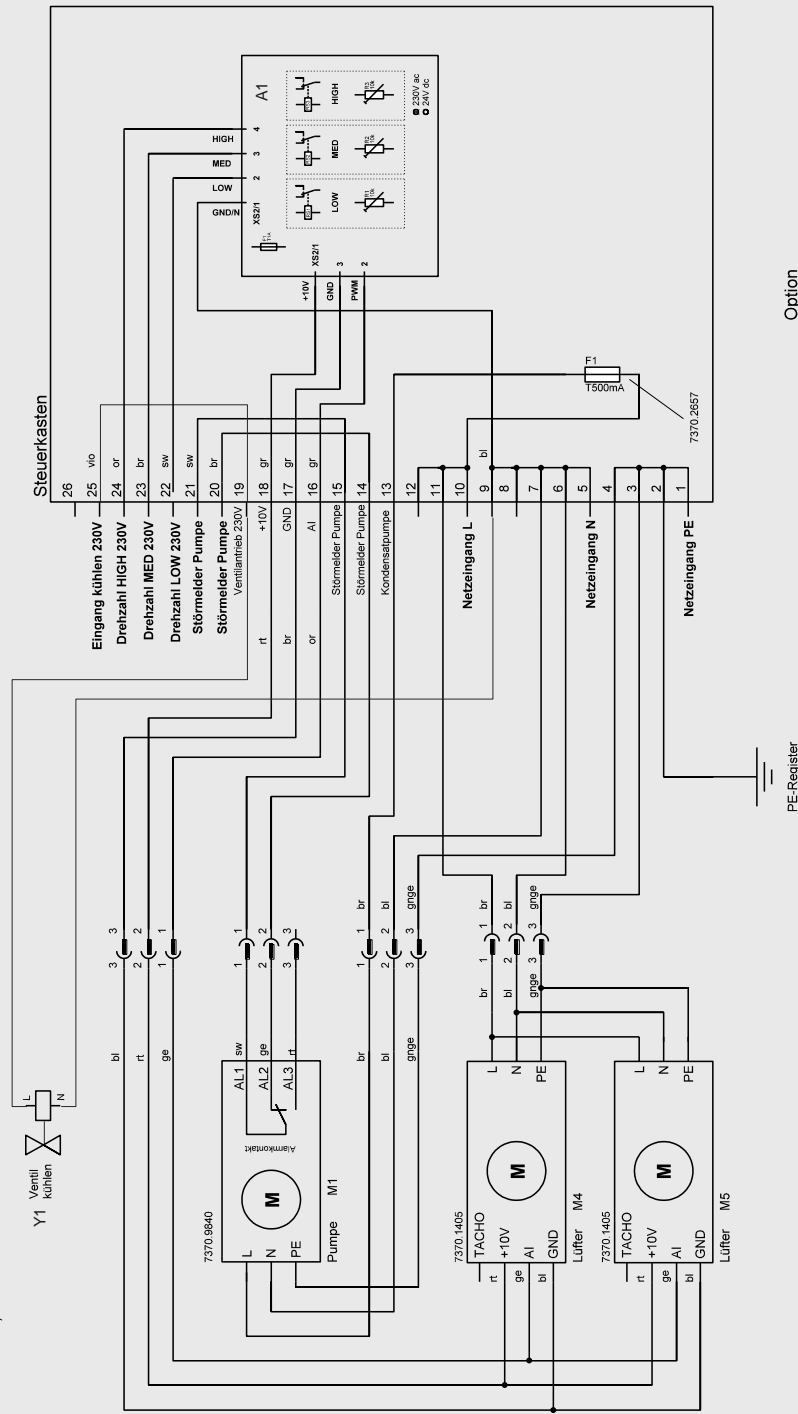

**Legende**

- A1: Relaisplatine Ventilatorstufen 230V AC
- M1: Kondensatpumpe
- M4: EC-Ventilator
- M5: EC-Ventilator
- F1: Feinsicherung 500 mA
- Y1: Ventiltrieb für 2 o. 3-Wege Ventil

Option

KS7.7370.9568.0

### Eingestellte Parameter (Siemens-Steuerung)

Parameter	Wert	Beschreibung
P01	1	Steuersequenz (nur kühlen)
P02	1	Betriebsartprofil (Betriebsarttaste)
P03	0	Betriebsartwahl Ventilator
P04	0	Wahl von °C oder °F
P05	0,0	Fühlerabgleich (intern, extern)
P06	0	Standard-Temperaturanzeige (0=Raumtemp.)
P08	21°C	Sollwert für Komfortbetrieb
P09	16°C	Min. Sollwert für Komfortbetrieb
P10	28°C	Max. Sollwert für Komfortbetrieb
P11	15°C	Sollwert für Economy Heizen
P12	30°C	Sollwert für Economy Heizen
P14	0	Tastatursperre
P15	2	Ventilatorstufe in Totzone (Komfortbetrieb)

ⓘ Wie Sie die Einstellung der Parameter P01 - P15 ändern können, ist in der Bedienungsanleitung für die Siemens-Fernbedienung beschrieben.

Parameter	Wert	Beschreibung
P30	2,0	P-Band/Schaltdifferenz im Heizbetrieb
P31	1,0	P-Band/Schaltdifferenz im Kühlbetrieb
P38	0	Funktionalität von X1, keine Funktion
P40	4	Funktionalität von X2, Störung Kondensatpumpe
P41	nc	Wirksinn von X2 wenn Digitaleingang
P42	3	Funktionalität von D1, Ext. ON/OFF (DI)
P43	no	Wirksinn von D1 wenn Digitaleingang
P46	1	Ausgang Y1/Y2, 2-Punkt (Kühlventil)
P48	1 min	Min. Einschaltdauer Ausgang
P49	1 min	Min. Ausschaltdauer Ausgang
P50	OFF	Min. Ausgang AUS Zeit an Q1, Q2, Q3
P52	1	Ventilatorbetrieb, freigegeben
P53	3	Ventilator Drehzahl 3-Stufig, DC 0...10 V (ECM Ventilator)
P55*	xy%	Schaltpunkt hohe Ventilator Drehzahl = x,y V
P56*	xy%	Schaltpunkt niedrige Ventilator Drehzahl = x,y V
P57	10%	Minimale Ventilator Drehzahl bei Start
P59	2	Min. Einschaltdauer Ventilator
P60	OFF	Ventilatorkick-Intervall im Komfortbetrieb
P61	OFF	Ventilatorkick-Intervall in Economy
P62	1000	Intervall für Filterreinigung (Std.)
P65	OFF	Sollwert für Schutzbetrieb Heizen
P66	OFF	Sollwert für Schutzbetrieb Kühlen
P67	0sec	Ventilator-Startverzögerung
P68	0	Verlängerung Komfortbetrieb
P69	OFF	Temporärer Sollwert für Komfortbetrieb
P70	ON	Infrarotempfänger
P71	OFF	Erneutes Laden der Werkeinstellungen
P73	0	Ausgang Funktion Q2
P74	0	Ausgang Funktion Q3


\*) : Werte ändern sich in Abhängigkeit zur Baugröße:

	W25	W35	W50
P55	38%	44%	52%
P56	30%	32%	32%


ⓘ Ändern Sie die Parameter P30ff nur nach Rücksprache mit OP-AIR. Wie Sie die Parameter 30ff ändern können, finden Sie auf Seite 42.

## Technische Zeichnung

Ansicht von rechts

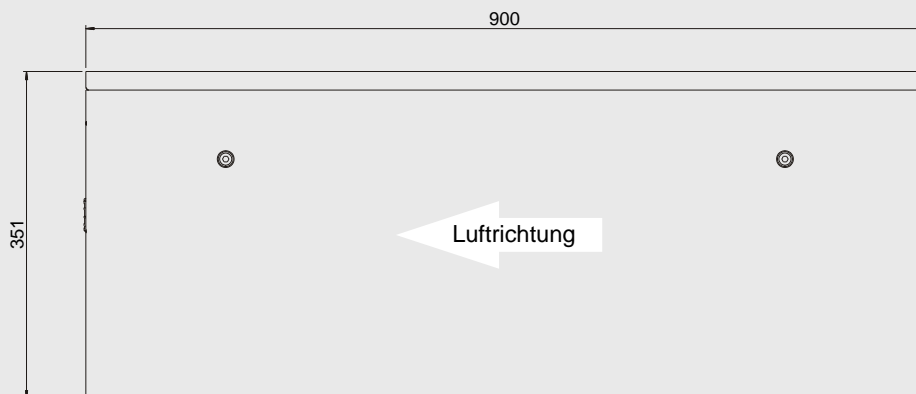

Ansicht von oben

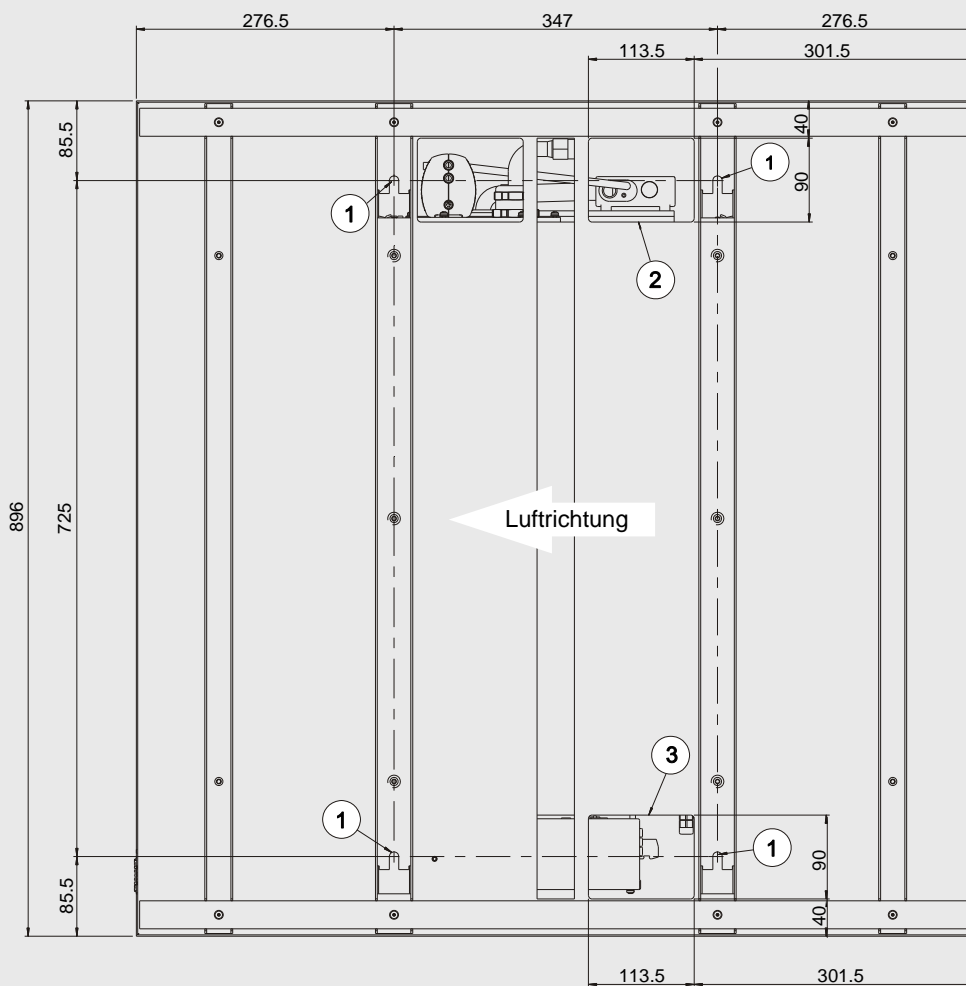

- ① Befestigungspunkte für M8 Gewindestange
- ② Öffnung für Kühlmittelversorgung
- ③ Öffnung für Elektroinstallation


Maße in mm

KS0.7370.0100.0



## Kurzdatenblätter

## Bemessung Siemens-Ventile

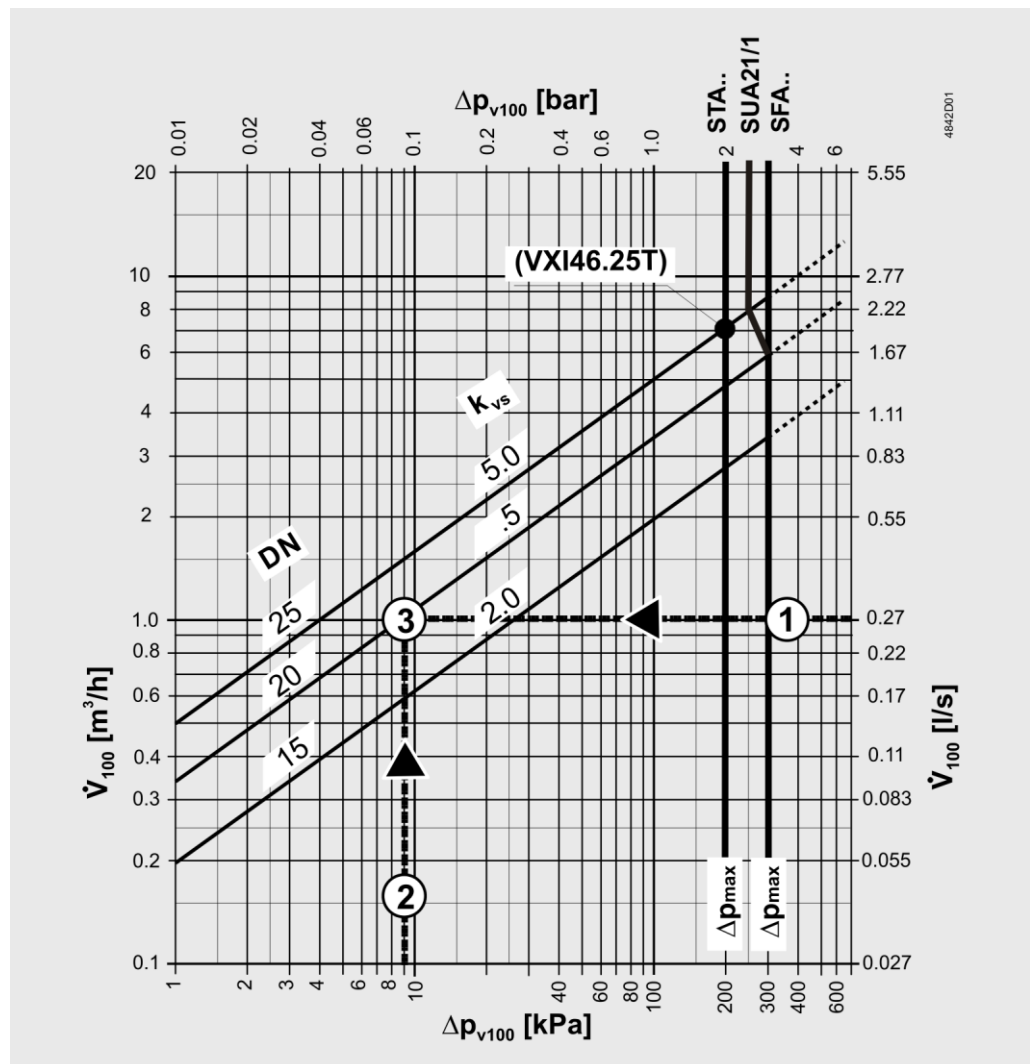

$\Delta p_{v100}$  Differenzdruck über dem voll geöffneten Ventil und dem Regelpfad A → AB bei Volumendurchfluss  $\dot{V}_{100}$

$\dot{V}_{100}$  Volumendurchfluss durch das voll geöffnete Ventil ( $H_{100}$ )

$\Delta p_{max}$  Maximal zulässiger Differenzdruck über dem Regelpfad des Ventils für den gesamten Stellbereich der Ventil-Stellantrieb-Einheit


100 kPa 1 bar  $\approx$  10 mWS

1 m<sup>3</sup>/h 0,278 l/s Wasser von 20 °C


## Beispiel:

- ①  $\dot{V}_{100}$  = 0,083 l/s
- ②  $\Delta p_{v100}$  = 9 kPa
- ③ Gesuchter  $k_{vs}$ -Wert = 1,0 m<sup>3</sup>/h

### Durchgangsventil Siemens VVP47.15-2.5

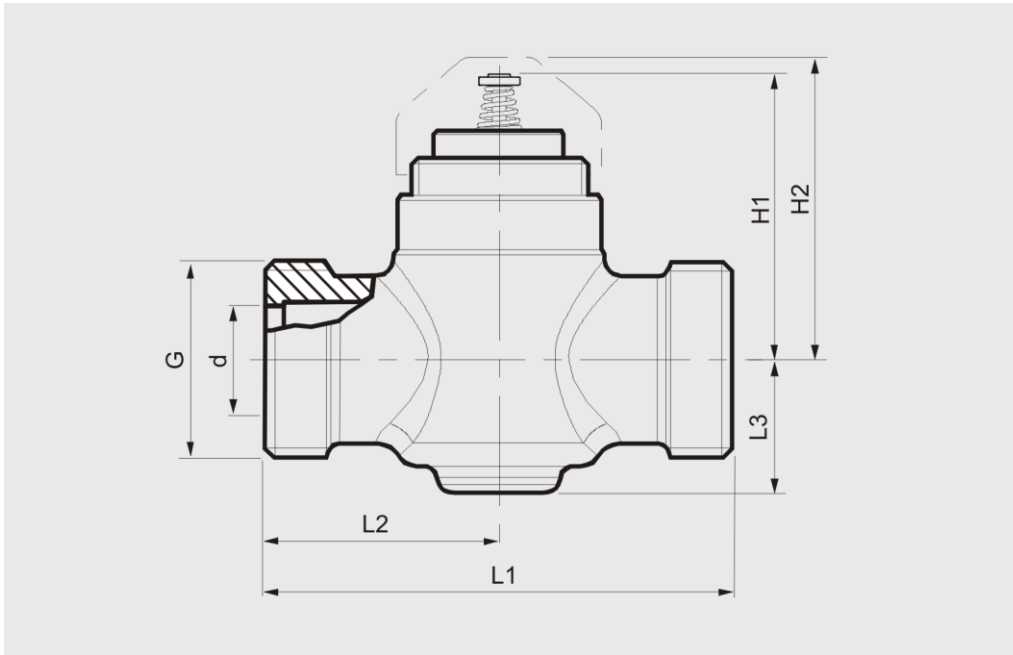


DN	G [Zoll]	d [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Gewicht [kg]
15	G3/4B	14	46	~49	65	32,5	19	0,34

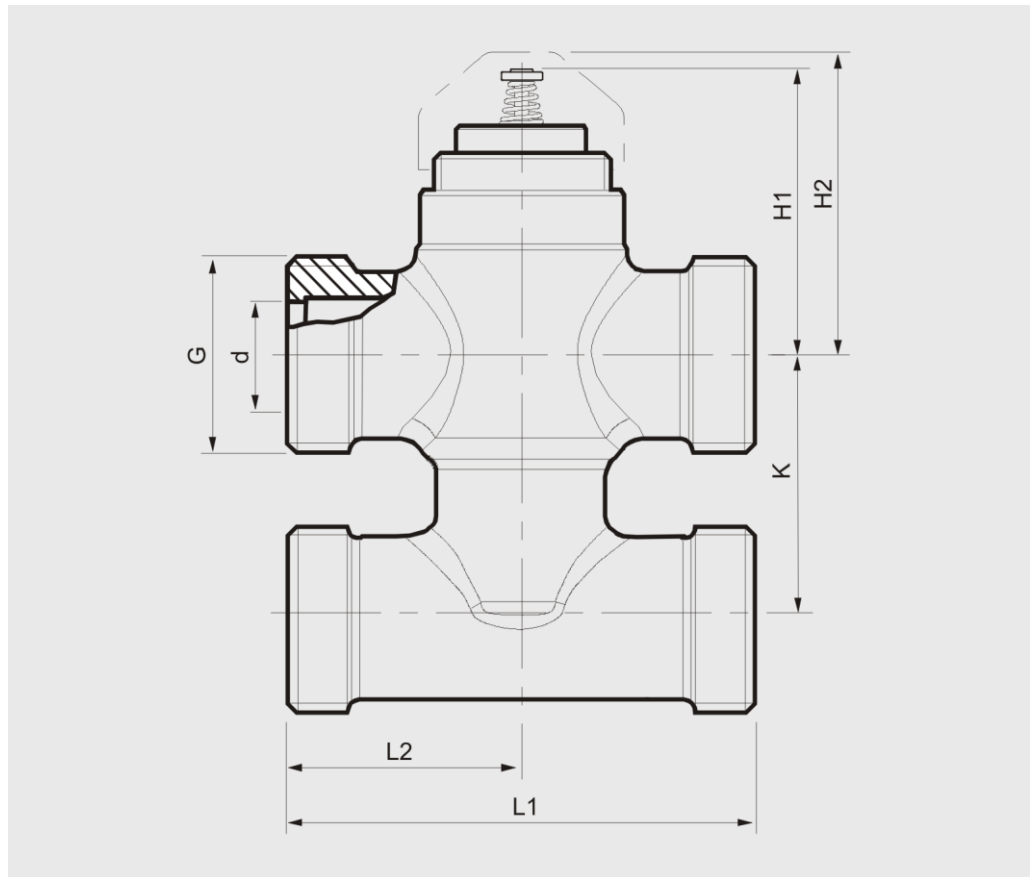**Dreiwegventil Siemens VMP47.15-2.5**


DN	G [Zoll]	d [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	K [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht [kg]
15	G3/4B	14	46	~49	40	65	32,5	0,48

### Ventilantrieb Siemens STP73

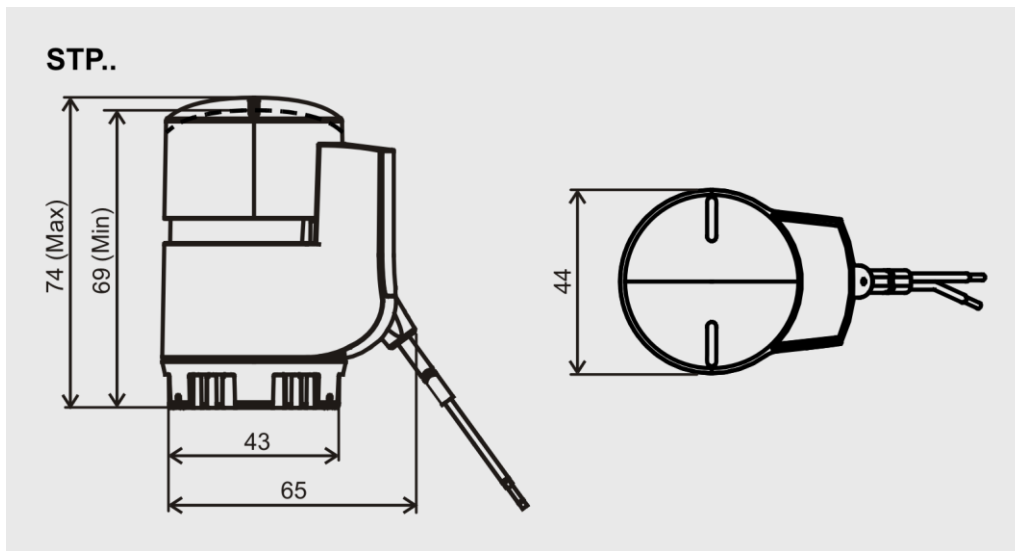


Stellung stromlos	Betriebs- spannung	Stellsignal	Stellzeit	Stellkraft	Anschluss- kabel	Gewicht
NO <sup>1)</sup>	AC/DC 24 V	2-Punkt, PDM/TPI <sup>2)</sup>	270 s	100 N	1 m	177 g

- 1) (Ventil) stromlos geschlossen in Bezug auf die Kleinventile V..P47..
- 2) Pulsdauermodulation/Time Proportional Integral in Zusammenhang mit Siemens Raumregler der Baureihe Desigo und andere Siemens Regler gemäss ihrem Datenblatt

## Leistungsdiagramm Kondensatpumpe

### Kondensatpumpe MaxiBlue™

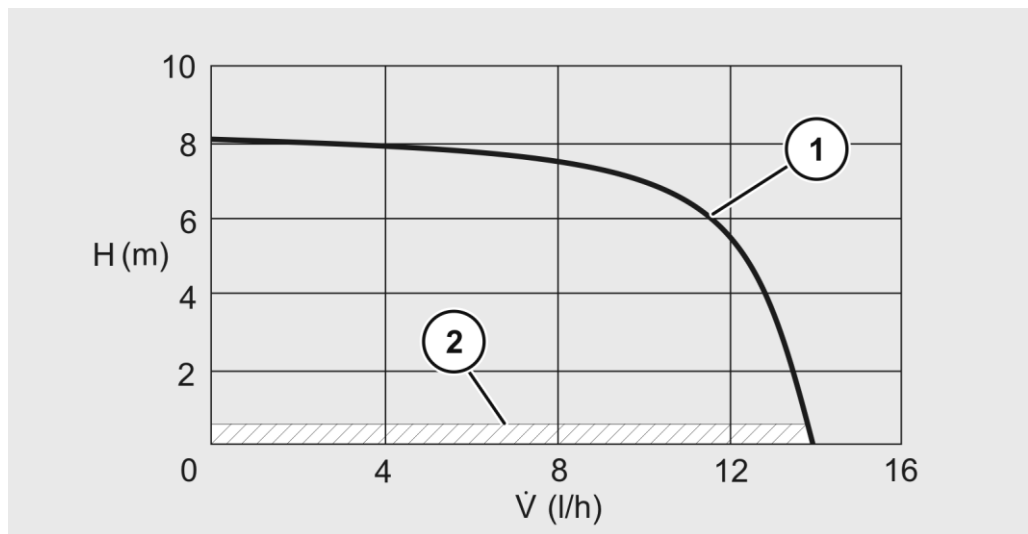

Nr.	Erläuterung
1	Leistungskurve
2	Garantierter Arbeitsbereich

## EG-Konformitätserklärung



### EG-Konformitätserklärung

nach EG-Richtlinie 2006/42/EG  
(Amtsblatt der Europäischen Union L157/24 vom 9.6.2006)  
über Maschinen, Anhang II 1.A

**Hersteller:** OP-AIR Projektgesellschaft für Raumluftechnik und Energieeffizienz mbH  
**Produkt:** Klimagerät  
**Produktmodelle:** Hepa Jet Smart  
Hepa Jet Smart D  
Hepa Jet TB3  
Hepa Jet TB3 light

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Produkt allen einschlägigen Bestimmungen sowie allen relevanten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der o. g. Richtlinie entspricht.

Darüber hinaus entspricht das Produkt folgenden Richtlinien:

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Amtsblatt der EU L 174/88 vom 01.07.2011)
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU über Elektromagnetische Verträglichkeit (Amtsblatt der EU L96/97 vom 29.03.2014)

Die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (Amtsblatt der Europäischen Union L96/357 vom 29.3.2014) wurde gemäß Anh. I Nr. 1.5.1 MRL 2006/42/EG hinsichtlich ihrer Schutzziele eingehalten.


Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN ISO 12100: 2010-11	Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobewertung und Risikominderung
EN 1037:1995 +A1:2008	Sicherheit von Maschinen – Vermeidung von unerwartetem Anlauf
EN 60204-1: 2006/AC:2010	Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

OP-AIR Projektgesellschaft für Raumluftechnik und Energieeffizienz mbH  
Mirko Märzdorf  
Lothringer Allee 2, 44805 Bochum  
Telefon: +49 234 33899820, E-Mail: info@op-air.de

Bochum, den 3. Mai 2019

  
Mirko Märzdorf, Geschäftsführer und Dokumentationsbeauftragter

OP – AIR Projektgesellschaft für  
Raumluftechnik & Energieeffizienz mbH  
Gustav-Winkler-Str. 22a / 33699 Bielefeld  
phone +49 (0) 521 - 94 19 37 0  
fax +49 (0) 521 - 94 79 32 29  
info@op-air.de / www.op-air.de

## Prüfzertifikat Hygienische Eignung

**HYBETA**  
HYGIENE · BERATUNG · TECHNISCHE ANALYSEN

### ZERTIFIKAT



### Hygienische Eignung der Sekundärluftkühlanlage „Hepa Jet Smart“ gemäß DIN 1946-4:2018-09 und VDI 6022-1:2018-01

AUFTRAGGEBER	OP-Air Projektgesellschaft für Raumlufttechnik und Energieeffizienz mbH
PRÜFGEGENSTAND	Sekundärluftkühlanlage „Hepa Jet Smart“
PRÜFUNG	Bewertung der hygienischen Sicherheit und Einsetzbarkeiten hygiene-relevanten Bereichen (wie im Gesundheitswesen) und Konformität mit DIN 1946-4:2018-09 sowie VDI 6022-1:2018-01.
PRÜFBERICHT	36375-GUT-ULK-1118-A
PRÜFERGEBNIS	Die hygienische Unbedenklichkeit und Konformität der Anlage „Hepa Jet Smart“ mit DIN 1946-4:2018-09 und VDI 6022-1:2018-01 wird bestätigt.
AUSSTELLUNGSDATUM	2018-11-30
AUTORISIERUNG	Dr. Frank Wille, Münster

  
Dr. Frank Wille

HYBETA GmbH  
Nevinghoff 20  
48147 Münster  
fon +49 (0) 2 51 28 51 - 0  
email info@hybeta.com  
www.hybeta.com

GESCHAFTSFÜHRER  
Dr. Frank Wille  
Dr. Dominik Löhr  
Sitz der Gesellschaft  
Amtsgericht Münster HRB 8569  
USt-IdNr. DE239415234

BANKVERBINDUNG  
Sparkasse Münsterland Ost  
IBAN DE90 4005 0150 0034 3553 54  
BIC WELADED1MST  
NIEDERLASSUNG HEIDELBERG  
NIEDERLASSUNG KROSTITZ

 **DAkkS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL 17316-01-02

Mehr wissen. Weiter denken. ■

**OP-AIR GmbH**

Lothringer Allee 2 (Im Energie-Effizienzzentrum)

44805 Bochum

Tel.: +49 (0) 234 33 89 98 20

Fax: +49 (0) 234 33 89 98 29

E-Mail: [info@op-air.de](mailto:info@op-air.de)